

# PHILIPS

Appkontrollerad  
smärtlindringsplatta


BlueTouch

Innovativ blå LED-teknik

Mot ryggont samt muskelvärk i ryggen

Kompatibel med iOS och Android

Innehåller rem för övre delen av ryggen

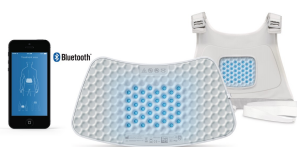

PR3741/00



## Naturlig smärtlindring utan läkemedel – för muskelvärk i ryggen

Kliniskt testad\* smärtlindringsbehandling med blått ljus

I Philips BlueTouch används en innovativ blåljusbehandling med dubbelverkande effekt. Den ger lugnande värme och stimulerar kroppens frigörande av kväveoxid, vilket ökar det lokala blodflödet och stimulerar kroppens naturliga återhämtningsförmåga.

### Innovativ blå lysdiodteknik

- Unikt med blått LED-ljus för att öka det lokala blodflödet
- Extra lugnande värmeeffekt för smärtlindring i ryggen
- Information om kontraindikationer i användarhandboken

### Ökar blodflödet lokalt vilket ger smärtlindring

- Använder värme och den naturliga läkande effekten hos blått ljus
- Behandling utan mediciner

### Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet

- Spåra framsteg med behandlingarna i en dagboksöversikt
- Använd behandlingsappen för full kontroll med en smart enhet

### Använd upp till 30 min två ggr om dagen för lindring i 1-2 v

- Känn resultat inom en till två veckor
- Korta behandlingstider, tre intensitetsnivåer
- Testa den: 30 dagars pengarna tillbaka-garanti



asimpleswitch.com

# Funktioner


## 40 optimerad blå lysdioder



# 40x

BlueTouch-plattan innehåller 40 blå lysdioder som skapar terapeutiskt ljus. Blått ljus ger värme och stimulerar kroppens naturliga utsläpp av kväveoxid. Tillsammans leder det till ett högre blodflöde, som i sin tur förbättrar näringsämnen och syretillförsel och avlägsnar metaboliter. Detta stöder återställningsprocessen för berörda muskler i behandlingsområdet.

## Behaglig värme

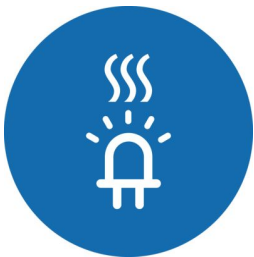

BlueTouch ger även välgörande värme som lugnar muskler för smärtlindring i ryggen och ger den som använder plattan en känsla av välbefinnande.

## Kontraindikationer

Använd inte BlueTouch om du har någon av de kontraindikationer som anges i användarhandboken. Läs hela översikten i användarhandboken. Några exempel: Om du har en känd solöverkänslighet, eller om du använder steroider. Det här läkemedlet gör huden mer känslig för irritation. Om du har en implanterad medicinsk enhet (skruvar osv.) i eller i närheten av behandlingsområdet eller en aktiv implantation, t.ex. pacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleaimplantat, aktiv medicinövervakningsenhet i kroppen eller om du är gravid

## Smärtlindring för ryggen utan mediciner

Philips BlueTouch använder värme och aktiverar naturliga läkande processer med blått ljus för att lindra ryggsmärta utan mediciner.

## Naturlig smärtlindring i ryggen

Den största fördelen med terapi med blått LED-ljus ligger i dess naturliga karaktär. Den blå lampan stimulerar kroppens egna processer. När det blå LED-ljuset träffar huden, frigörs kroppens egna reserver med kvävemonoxid (NO)-molekyler och transporteras till musklerna som orsakar ryggsmärtorna. Den här lilla molekylen har en fantastisk effekt: smärtan i ryggen lindras naturligt.

## Använd med den kostnadsfria behandlingsappen




Philips BlueTouch styrs med vår särskilt utformade app för att göra det enkelt att välja och styra smärtlindringen. Behandlingsappen finns för smartphone och surfplatta och är kompatibel med iOS 7 till iOS 10 och med Android 4.4 Kitkat till Android 7.

## Översikt över behandling i dagbok

I behandlingsappen finns en behandlingsdagbok. Med ett tryck på en knapp får du en omfattande översikt över din personliga behandlingshistorik. Du kan använda den här översikten för att optimera smärtbehandlingen för ryggen.

## Behandlingens varaktighet

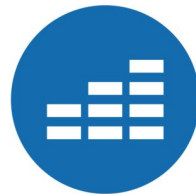

# 3x

Philips BlueTouch kan användas upp till två gånger om dagen. Längden på varje behandling beror på vilken intensitetsnivå som är vald. I läge 1 (skonsam) ska enheten användas i högst 30 minuter, i läge 2 (medel) i 20 minuter och i läge 3 (intensivt) i 15 minuter per behandling. Intensitetsnivåer kan väljas för

att passa dina önskemål. De skiljer sig åt i ljusintensitet och temperatur. Tack vare verkningsättet för blått LED-ljus, kan BlueTouch bidra till effektiv smärtlindring i ryggen när de används varje dag.

## Återköpsgaranti inom 30 dagar

Se själv hur det fungerar och testa Philips BlueTouch! Testa den i minst två veckor för optimal effekt. Om du inte är nöjd kan du få tillbaka pengarna inom 30 dagar efter inköpsdatum.

## Rekommenderad användning

Rekommenderad användning är två gånger om dagen i upp till 30 min. Känn resultat inom en till två veckor.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

# Specifikationer

## Vad medföljer?

BlueTouch-smärtlindringsplatta  
Rem för övre delen av ryggen  
Adapter

## Användningsområden

Mot ryggont samt muskelvärk i ryggen  
Övre delen av ryggen

## Användning

Upp till två gånger om dagen

Läge 1 (låg): Två gånger om dagen i 30 min

Läge 2 (medel): Två gånger om dagen i 20 min

Läge 3 (hög): Två gånger om dagen i 15 min

## Specifikationer

Märkspänning: 100–240 V

Nominell ineffekt: 15 W

Märkfrekvens: 50–60 Hz

Class: Medicinsk enhet klass IIa

Klassificering: Skyddsklass 1

Vattenintrång: IP22

Maximal daglig dos: < 108,5 J/cm<sup>2</sup>

Batterityp: Litiumjon

Våglängd för blått LED-ljus: 453 nm

## Vikt och mått

BlueTouch vikt: 0,168 kg

Plattans mått (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

## Programvara

**iPhone®-kompatibilitet:** Version iOS7 till iOS10, iPhone® 4S och senare

**iPad®-kompatibilitet:** Version iOS7 till iOS10, iPad® 3:e generationen, iPad Air™, iPad mini™ och senare

**iPod®-kompatibilitet:** Version iOS7 till iOS10, iPod touch® 5:e generationen och senare

**Kompatibilitet med Android:** Android 4.4 KitKat till Android 7

