

# PHILIPS

## sonicare

Tussen de tanden,  
oplaadbaar

AirFloss

Met 2 spuitkoppen

1 spuitkophouder



HX8233/02



## Flost u niet? AirFloss dan!

Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss de eenvoudigste oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op plekken waar de tandenborstel niet bij kan.

### Gebitsreiniging binnen 30 seconden

- Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden
- Richt. Druk. Schoon!

### Helpt een gezonde gewoonte te ontwikkelen

- Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

### Verbeterd de mondhygiëne


- Verwijdert meer tandplak tussen de tanden
- Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

### Gebruiksvriendelijk

- Technologie met lucht en microdruppels
- Comfortabel ergonomisch handvat
- Geleidetip voor juiste plaatsing
- Een spuitkop voor elk gezinslid


# Kenmerken

## Een gemakkelijke manier om te beginnen

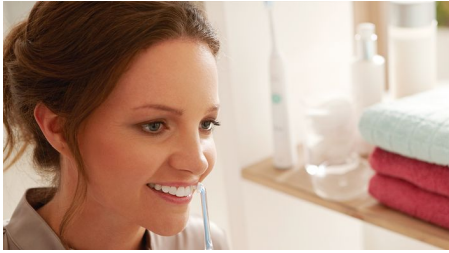

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flossen, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

## Verwijdert meer tandplak tussen de tanden

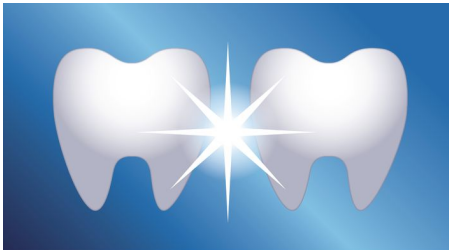

Verwijdert meer tandplak tussen de tanden

## Technologie met lucht en microdruppels



Technologie met lucht en microdruppels

## Geleidetip



De slanke, gebogen spuitkop maakt het eenvoudig om het apparaat goed te plaatsen. Beweeg de spuitkop gewoon langs het tandvlees over het oppervlak van de tand tot de tip de ruimte tussen de tanden bereikt.

## Schoon in 30 seconden



Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

## Eenvoudig te vullen reservoir




Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water voor een verfrissende reiniging, richt het apparaat en druk op de knop. Het reservoir is groot genoeg voor maximaal twee keer gebruiken.

## Gezonder tandvlees



Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

## Helpt gaatjes te voorkomen

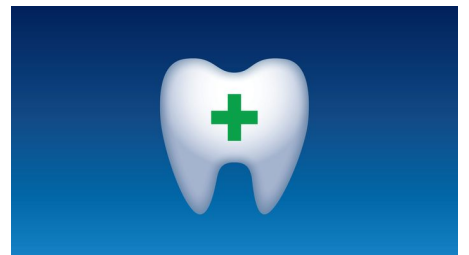

De Sonicare AirFloss spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

## Ergonomisch handvat

De AirFloss, die is ontworpen om eenvoudig te bewegen in kleine ruimten, heeft een comfortabel ergonomisch handvat en een antislipgreep.

## Gekleurde spuitkoptips

Dankzij de gekleurde spuitkoptips en de handige spuitkophouder kan de AirFloss door het hele gezin worden gebruikt.

# Specificaties

## Gebruiksgemak

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Batterij-indicator:** Knipperend: de batterij is bijna leeg

**Levensduur accu:** Tot 2 weken

**Spuitskophulpstuk:** Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruiksduur:** Vervang de spuitkop iedere 6 maanden

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Laadtijd:** 24 uur om volledig op te laden

## Vermogen

**Voltage:** Oplader voor verschillende voltages

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Meegeleverde artikelen

**AirFloss-handvat:** 1

**AirFloss-spuitskop:** 2

**Docking station:** 1 oplader voor verschillende voltages

**Spuitskophouder:** 1

## Reinigingsprestaties

**Performance:** Verwijdert tot vijf keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvles in slechts twee weken

**Functie voor automatische activering:** Reinigt de hele mond in 30 seconden

**Spuitskoppen:** Voor de beste resultaten om de zes maanden vervangen

## Ontwerpspecificaties

**Kleur(en):** Wit met groene accenten

