

PHILIPS

AVENT

Электрический
молокоотсос Plus

Двойной

Питание от сети



SCF393/11



Вдохновляемся природой. Создаем для мам

Технология для быстрого и естественного потока молока*

Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта

Быстрое сцеживание, больше молока за меньшее время*

- Технология для быстрого и естественного потока молока*

Аккуратно и с комфортом


- Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму
- Сцеживание без наклона вперед

Индивидуальные настройки

- Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки
- Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)
- Минимум компонентов и интуитивная настройка
- Функция памяти
- Функция приостановки/запуска
- Сумка и футляр для молокоотсоса


Особенности

Более быстрый поток молока*

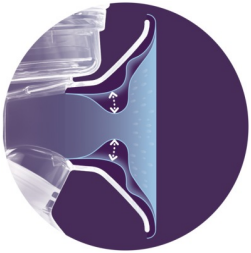

Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

Адаптируется под форму соска

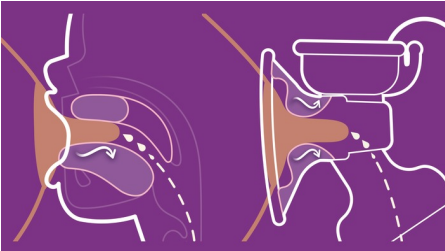

Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

Комфортная посадка



Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год); 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический

молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

Адаптируется под ваши потребности



Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

Простая очистка и подготовка к работе



Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

Сохраняйте любимые настройки



Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настройки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

Сумка и футляр для молокоотсоса



Кладите прибор в сумку и используйте футляр с изоляцией для компактной переноски.

Незаметное сцеживание в любом месте



Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

Ставьте на паузу, когда это нужно



Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.

Характеристики

Питание

Напряжение в электросети: 100–240 В В

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая подушечка с адаптивной формой:

Деликатная стимуляция

Настройки: 16 уровней сцеживания, 8 уровней стимуляции

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая очистка и сборка, Функция памяти, Тихий мотор, Сумка для переноски и футляр

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Комплект для сцеживания: 2 шт.

Моторный блок (только проводное использование): 1 шт.

Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+: 2 шт.

Адаптер microUSB (проводное использование): 1 шт.

Дорожная сумка: 1 шт.

Футляр с изоляцией: 1 шт.

Крышка:

2 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.



* На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2019 г.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европейской расы, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

* На основании результатов опроса для подушечки 1к после клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.)

* Молокоотсос без бисфенола-А* касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.