

# PHILIPS

Lámpara de  
infrarrojos InfraCare

300 W

Zona de tratamiento

Temporizador digital



HP3631



## Alivio eficaz del dolor

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Philips InfraCare alivia eficazmente el dolor de músculos y articulaciones. Su lámpara de infrarrojos de 300 vatios de potencia genera un calor agradable por infrarrojos que penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y proporcionando alivio eficaz a zonas de 40 x 30 cm.

### Alivio eficaz del dolor

- Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

### Tratamiento por zonas

- Lámpara halógena de infrarrojos de 300 vatios

### Fácil de usar

- Angulo ajustable

### Control del tratamiento

- Temporizador digital para establecer la duración del tratamiento


## Destacados

### Lámpara halógena de infrarrojos de 300 vatios



InfraCare HP 3631 de Philips ha sido optimizado para aliviar eficazmente el dolor en zonas de 40 x 30 cm como, por ejemplo, hombro y cuello, parte inferior de la espalda, un muslo o un brazo. InfraCare incorpora avanzada tecnología de lámpara halógena de infrarrojos. Sus propiedades ópticas especiales, el filtro y la potente lámpara halógena de 300 vatios han sido optimizados, permitiendo realizar tratamientos por zonas (40 x 30 cm) con un calor mucho más confortable, ya que se reparte de manera más uniforme por toda la zona tratada.

### Angulo ajustable

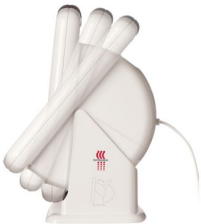

La lámpara de infrarrojos se puede inclinar fácilmente hasta 40 grados hacia atrás.

### Temporizador digital para establecer la duración del tratamiento



La duración del tratamiento se puede controlar fácilmente fijando el número de minutos recomendados o deseados. El temporizador digital realiza la cuenta atrás automáticamente y emite una señal sonora al final de la sesión.

### Calor por infrarrojos que penetra en profundidad



La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.

## Especificaciones

### Alivio eficaz del dolor

Calor que penetra en profundidad

### Tratamiento por zonas

Zona de tratamiento: 40 x 30 cm

Lámpara halógena de infrarrojos: 300 W

### Fácil de usar

Regulación: 0-40 grados (retroceso)

Asa de tacto suave: para facilitar su transporte y colocación

Interruptor de encendido/apagado

### Especificaciones técnicas

Potencia: 300 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Vida útil de las lámparas: 500 hora(s)

Batería: Alcalina LR-54, 1,5 V (vida útil de 200 usos)

Longitud del cable: 200 cm

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

### Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 20 x 30,9 x 17,2 (anch. x alt. x prof.) cm

Peso del producto: 1,4 kg

Dimensiones de caja unitaria:

28 x 38,6 x 24,5 (anch. x alt. x prof.) cm

Peso de caja unitaria: 1,8 kg

Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje:

29 x 40,4 x 74,5 (anch. x alt. x prof.) cm

Peso de unidad de embalaje: 5,4 kg

Cantidad en palé europeo: 60 uds

### Datos logísticos

Código CTV: 884363101000

País de origen: Alemania

### Seguridad

Certificado IEC: Cumple las normativas IEC 60601 y 60335

### Control del tratamiento

Temporizador digital: con información auditiva

### Aparato médico

Directiva sobre Dispositivos Médicos: 2007/47/EC, MDD 93/42/CEE

