

PHILIPS

Infračervená lampa InfraCare

650 W

Ošetření poloviny těla

Výška 63,5 cm

HP3641



Účinná úleva od bolesti

Hluboko pronikající infračervené teplo

Přístroj Philips InfraCare poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů a kloubů. Příkon 650 W vydává infračervené teplo, které je velmi příjemné a proniká hluboko do pokožky, stimuluje krevní oběh a poskytuje účinnou úlevu pro oblasti o velikosti 60 x 40 cm na polovině těla.

Snadné použití

- Nastavitelný úhel s otáčením

Účinná úleva od bolesti

- Hluboko pronikající infračervené teplo

Ošetření poloviny těla

- 650W infračervená halogenová lampa


Přednosti

650W infračervená halogenová lampa



Přístroj Philips InfraCare HP 3643 byl optimalizován pro dosažení účinné úlevy v oblastech o velikosti 60 x 40 cm, například na celých zádech, obou ramenech a krku nebo stehenním svalu. Přístroj InfraCare obsahuje inovativní technologii infračervených lamp. Speciální optika, filtr a výkonná 650W halogenová lampa byly optimalizovány tak, aby umožnily ošetření poloviny těla (60 x 40 cm) a vydávaly mnohem příjemnější teplo, protože infračervené teplo se rovnoměrněji rozptyluje nad ošetřovanou oblastí.

Nastavitelný úhel s otáčením

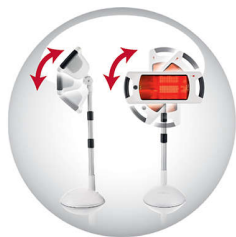

Přístroj InfraCare HP 3643 se díky své flexibilitě snadno používá k ošetření těla a v různých polohách (např. při ležení na lůžku

nebo gauči). Kromě nastavení výšky lze kryt lampy snadno nastavit do polohy zajišťující optimální ošetření správné části těla, a to přesunem krytu lampy do vodorovné nebo svislé polohy (o 90 stupňů doleva nebo doprava) a nakloněním nahoru nebo dolů (o 45 stupňů).

Hluboko pronikající infračervené teplo



Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Hmotnost a rozměry

Product dimensions: 29,0 x 63,5 x 29,0 (Š x V x H) cm
Product weight: 5,5 kg

Snadné použití

2 rukojeti: pro snadný přenos a polohování

Vypínač: Ano

Digitální uživatelské rozhraní: pro informace o čase a intenzitě světla

Možnost prodloužení do výšky: 45 - 80 cm

Snadno polohovatelný kryt lampy

(vlevo/vpravo): 90

Snadno polohovatelný kryt lampy

(nahoru/dolů): 45

Technické údaje

Voltage: 230 V

Cord length: 300 m

Power: 650 W

Frequency: 50/60 Hz

Hmotnost a rozměry

Množství na Euro paletě: 18 pcs

Rozměry balení F-box (=A-box):

33,9 x 80,0 x 36,5 (Š x V x H) cm

Hmotnost balení F-box (=A-box): 6,5 kg

Technické údaje

Izolace: Třída II (dvojitá izolace)

Životnost lamp: 500 hodin

Logistické údaje

Země původu: Německo

Bezpečnost

Certifikace IEC: Vyhovuje normám IEC 60601 a 60335

Ošetření poloviny těla

Oblast ošetření: 60 x 40 cm

Infračervená halogenová lampa: 650 W

Logistické údaje

Kód CTV: 884364101000

Lékařský přístroj

Směrnice Medical Device Directive: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Účinná úleva od bolesti

Teplo pronikající hluboko do pokožky: Ano

Ovládání ošetření

Digitální časovač: s automatickým vypnutím

Stmívač se 3 nastaveními tepla: Ano

Funkce pozastavení: Ano

