

PHILIPS

Инфрачервена лампа
InfraCare

650 W

Третиране на половината тяло

Височина 63,5 см

HR3641



Ефикасно облекчава болка

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Лампата Philips InfraCare ефикасно облекчава болките в мускулите и ставите. Нейната 650-ватова инфрачервена топлина е много приятна и прониква дълбоко през кожата, стимулира кръвообращението и дава ефикасно облекчение на площ от 60x40 см, равна на половината тяло.

Лесна употреба

- Регулируем ъгъл с въртене

Ефикасно облекчава болка

- Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Лечение на половината тяло

- 650-ватова инфрачервена халогенна лампа


Акценти

650-ватова инфрачервена халогенна лампа



Philips InfraCare HP 3643 е оптимизирана за ефективно облекчаване на болки на площ 60 x 40 cm, например цял гръб, двете рамена и врата или бедрото. InfraCare се отличава с иновационна инфрачервена халогенна лампа. Специалната оптика, филтърът и мощната 650-ватова халогенна лампа са оптимизирани, като позволяват терапия на половината тяло (60 x 40 cm) и много повече приятна топлина, тъй като инфрачервената топлина се разпределя по-равномерно върху третираната площ.

Регулируем ъгъл с въртене

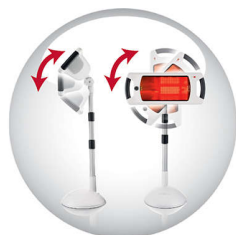

InfraCare HP 3643 е лесна за работа при лечение на половината тяло и за различни ситуации (например, лежане на легло или кушетка) благодарение на

нейната максимална гъвкавост. Освен че може да се регулира по височина, корпусът на лампата може да се позиционира лесно, за да лекува точната част на тялото с преместване в хоризонтално или вертикално положение (ляво/дясно на 90 градуса) и наклоняване нагоре или надолу (45 градуса).

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина



Доказано е, че инфрачервената светлина ефективно облекчава болки в мускулите и схванатите стави. Комфортната топлина от инфрачервените лъчи прониква дълбоко в кожата, засилва кръвообращението и отпуска мускулите. Когато мускулите се успокоят, те естествено се отпускат и раздвижват. Топлината прави тъканите по-податливи и по този начин намалява сковаността на ставите и ги прави по-гъвкави.

Технически спецификации

Voltage: 230 V

Product dimensions: 29,0 x 63,5 x 29,0 (ШxВxД) cm

Power: 650 W

Cord length: 300 m

Product weight: 5,5 kg

2 ръкохватки: за лесно транспортиране и разполагане

Frequency: 50/60 Hz

Ключ за вкл./изкл.

Цифров потребителски интерфейс: за обратна връзка по време и топлинен интензитет

Височината може да се увеличава: 45-80 cm

Корпус на лампата с лесно позициониране (ляво/дясно): 90

Корпус на лампата с лесно позициониране (нагоре/надолу): 45

Тегло и размери

К-во на европалет: 18 pcs

Размери на F-кутията (=A-кутия): 33,9 x 80,0 x 36,5 (ШxВxД) cm

Тегло на F-кутията (=A-кутия): 6,5 kg

Технически спецификации

Изолация: Клас II (двойна изолация)

Живот на крушките: 500 hour(s)

Логистични данни

Страна на произход: Германия

Инфрачервена халогенна лампа: 650 W

Площ за третиране: 60 x 40 cm

Сертифицирана от IEC: Съответства на IEC 60601 и 60335

Медицински уред

Директива за медицинските уреди: 2007/47/ЕО, MDD 93/42/ЕИО

CTV код: 884364101000

Ефективно облекчава болка

Дълбоко проникваща топлина

Контрол на лечението

Цифров таймер: с автоматично изключване

Реостат с 3 настройки на топлина

Функция за пауза

