


PHILIPS

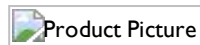

Инфракрасная лампа
InfraCare

650 Вт

Воздействие на половину тела

Высота 63,5 см

HR3641

Эффективное снятие боли

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение мощностью 650 Вт дает ощущение комфорта и глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращение и снимая боль на участках тела площадью 60 x 40 см.

Легко использовать

- Регулируемый угол с возможностью поворота

Эффективное снятие боли

- Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Воздействие на участок тела

- Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 650 Ватт

Основные особенности

Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 650 Ватт



Лампа Philips InfraCare HP 3643 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 60 x 40 см, например на всей спине, обоих плечах и шее или на бедре. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и мощная (650 Ватт) галогеновая лампа рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела (60 x 40 см). Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.

Регулируемый угол с возможностью поворота

InfraCare HP 3643 прост в использовании, и благодаря своей максимальной универсальности предназначен для обогрева участков тела в разных положениях

(например, лежа на кровати или диване). Помимо регулировки высоты, плафон можно с легкостью устанавливать в оптимальном положении для обогрева определенной части тела, регулируя его положение по горизонтали и вертикали (на 90 градусов влево/вправо), и наклоняя вверх или вниз (на 45 градусов).

Глубоко проникающее инфракрасное излучение



Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращение и согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

Характеристики

Легкость использования

- 2 ручки: для простой перестановки и установки
- Переключатель включения/выключения
- Регулировка по высоте: 45-80 см
- Настраиваемый экран лампы (влево/вправо): 90
- Настраиваемый экран лампы (вверх/вниз): 45

Безопасность

- Сертификация IEC: Соответствует требованиям IEC 60601 и 60335
- Область обогрева: 60 x 40 см
- Инфракрасная галогеновая лампа: 650 W

Эффективное обезболивание

- Глубокое проникание тепла

Контроль лечения

- Цифровой таймер: с функцией автоматического отключения
- Плавный переход между 3 режимами обогрева
- Функция Паузы

Технические характеристики

- Длина шнура: 300 m
- Напряжение: 230 V
- Питание: 650 W
- Термоизоляция: Class II (двойная изоляция)
- Частота: 50/60 Hz
- Срок службы лампы: 500 hour(s)

Вес и габариты

- Вес продукта: 5,5 kg
- Габариты изделия: 29,0 x 63,5 x 29,0 (ВxШxГ) cm
- Кол-во в европалете: 18 шт.
- Размеры F-box (=A-box): 33,9 x 80,0 x 36,5 (ВxШxГ) cm
- Вес F-box (=A-box): 6,5 kg

Логистические данные

- Код СТВ: 884364101000
- Страна изготовления: Германия

Легко использовать

- Цифровой пользовательский интерфейс: для быстрого отклика и интенсивности нагрева

Медицинское оборудование

- Директива по медицинскому оборудованию: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

