


# PHILIPS

## AVENT

Подарочный набор с  
стерилизатором для СВЧ

Классика

SCF277/01

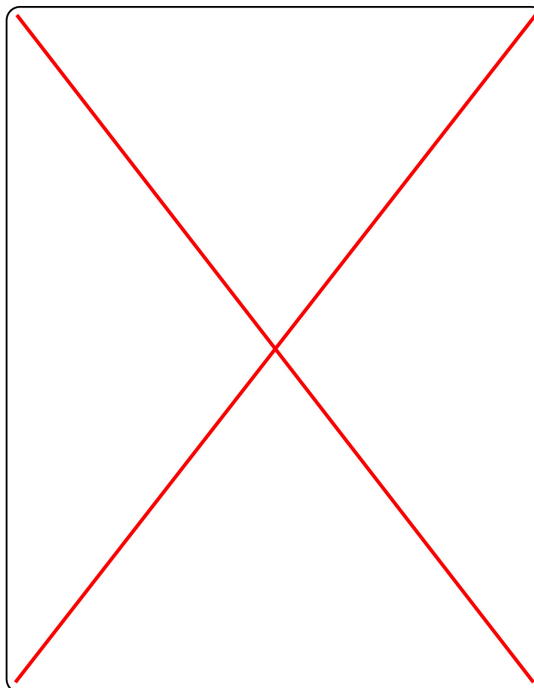

## Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты\*

Ультрабыстрый стерилизатор, прост в использовании

Благодаря компактному и легкому дизайну стерилизатор для СВЧ AVENT идеально подходит для использования дома или в дороге

### Исключительно быстро и просто

- Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь

### Легкий и компактный

- Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

### Безопасен, прост в обращении

- Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

### Безопасен, прост в обращении

- Боковые ручки надежно закрывают крышку

### Большая вместимость

- Вмещает шесть бутылочек Philips AVENT

## Особенности

### Просто налейте воду

Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь всего на 2 минуты. Точное время стерилизации зависит от мощности вашей печи: 2 мин. при 1100—1850 Вт, 4 мин. при 850—1000 Вт, 6 мин. при 500—850 Вт.

### Удобен в поездках

Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).

### Содержимое остается стерильным

Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

### Естественная стерилизация паром

Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных

бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

### Защелки надежно закрывают крышку

Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанью горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.

### Вмещает 6 бутылочек Philips Avent

Несмотря на компактный размер, только этот стерилизатор для микроволновой печи способен вместить 6 бутылочек Philips Avent. В то время как большинство стерилизаторов для микроволновой печи вмещают в себя только 4 бутылочки, стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent позволяет простерилизовать за один раз все бутылочки, использованные в течение дня. Он также подходит для стерилизации молокоотсосов.

## Характеристики

### Этапы взросления

**Stage:** 0—6 месяцев

**England:** Да

**Water capacity:** 200 мл

**Время стерилизации:**

\*2 мин. при мощности 1100—1850 Вт, 4 мин. при мощности 850—1000 Вт, 6 мин. при мощности 500—800 Вт

### Вес и габариты

**Weight:** 740 g

**Dimensions:** 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) mm

### В комплект входят:

**Microwave steam sterilizer:** 1 pcs

**Tongs:** 1 pcs

**Бутылочка серии "Классика" 125 мл:** 2 pcs

**Бутылочка серии "Классика" 260 мл:** 2 pcs

### В комплект входят:

**Measuring jug:** 1 pcs

