




Philips
Lampu inframerah InfraPhil

150W

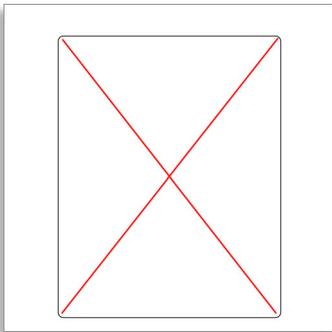

HP3616

Meredakan nyeri otot

Kehangatan inframerah terfokus dan meresap ke dalam

Kehangatan terfokus dan meresap ke dalam dari lampu inframerah

Mudah digunakan

- Sakelar on/off
- Sudut dapat diubah

Meredakan nyeri otot

- Kehangatan Inframerah yang meresap ke dalam

Mudah disimpan

- Tempat penyimpanan kabel

PHILIPS

Spesifikasi

Mudah digunakan

- Dapat disesuaikan: 0-40 derajat (ke belakang)
- Sakelar on/off

Spesifikasi teknis

- Masa pakai lampu: 750 sesi per 10 menit

Pengaman

- Bersertifikasi IEC: Sesuai dengan IEC 60335

Mudah disimpan

- Tempat penyimpanan kabel

Spesifikasi teknis

- Daya: 150 W
- Panjang kabel: 180 m
- Voltase: 220/230 atau 240/250 V V
- Penyekat: Kelas II (isolasi ganda)
- Frekuensi: 50 Hz
- Jenis lampu: PAR 38E, 150 W + cincin prismatic

agar lebih terfokus

Berat dan dimensi

- Berat produk: 1 kg
- Dimensi F-box: 24,0 x 28,8 x 62,4 (T x L x P) cm
- Dimensi produk: 22,0 x 13,0 x 18,5 (T x L x P) cm
- Berat F-box: 1 kg
- Jumlah F-box dalam A-box: 6 pcs
- Jml. pada palet Euro: 192 pcs
- Berat A-box: 6,4 kg
- Dimensi F-box: 22,5 x 14,0 x 20,4 (T x L x P) cm

Data logistik


- Negara asal: Jerman
- Kode CTV: 884361601000

Peralatan medis

- Aturan Perangkat Medis: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Kelebihan Utama

Kehangatan Inframerah yang meresap ke dalam

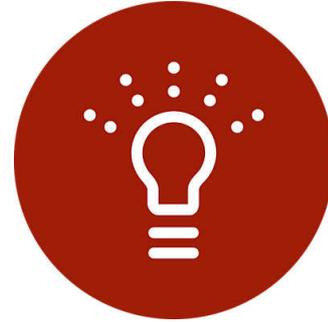

Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

Sudut dapat diubah

Posisi lampu inframerah ini dapat diatur dengan mudah hingga 40 derajat ke belakang.

Sakelar on/off

Sakelar on/off berada di belakang lampu inframerah, sehingga steker tidak perlu dicabut sesuai perawatan.

Tempat penyimpanan kabel



Lampu inframerah ini memiliki tempat menyimpan kabel di belakangnya. Cukup gulung kabel mengelilingi tempat penyimpanan dan alat bisa kembali disimpan dengan mudah.



Tanggal dikeluarkan
2022-06-27

Versi: 7.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com