

PHILIPS

Lampu inframerah InfraCare

650 W

Perawatan separuh badan

Tinggi 63,5cm

HP3641




Kelebihan Utama

Lampu halogen inframerah 650 Watt



Philips InfraCare HP 3643 telah dioptimalkan untuk meredakan nyeri secara efektif di area seluas 60 x 40 cm, seperti seluruh punggung, kedua pundak dan leher atau paha. InfraCare menghadirkan teknologi lampu halogen inframerah yang inovatif. Optik khusus, filter, dan lampu halogen kuat berdaya 650 Watt dioptimalkan, memberikan perawatan separuh badan (60 x 40cm), dan kehangatan yang lebih nyaman, karena kehangatan inframerah terbagi lebih merata pada area perawatan.

Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

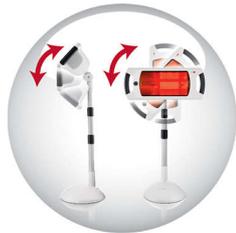

InfraCare HP 3643 mudah digunakan untuk perawatan separuh badan dan untuk berbagai situasi (mis. berbaring di atas ranjang atau

sofa) karena memiliki fleksibilitas maksimal. Di samping tinggi yang bisa disesuaikan, wadah lampu bisa diposisikan dengan mudah untuk merawat bagian tubuh yang tepat secara optimal, dengan menggerakkan wadah lampu ke posisi horizontal atau vertikal (kiri/kanan 90 derajat) dan dengan memiringkannya ke atas atau bawah (45 derajat).

Kehangatan infra merah meresap ke dalam



Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

Spesifikasi

Mudah digunakan

2 pegangan: untuk pengangkutan dan pengaturan posisi yang mudah
Sakelar on/off

Antarmuka pengguna digital: untuk umpan balik tentang waktu dan intensitas kehangatan

Tinggi dapat diubah: 45-80 cm

Wadah lampu yang mudah diposisikan (kiri/kanan): 90

Wadah lampu yang mudah diposisikan (atas/bawah): 45

Spesifikasi teknis

Power: 650 W

Panjang kabel: 300 m

Voltage: 230 V

Frequency: 50/60 Hz

Berat dan dimensi

Berat produk: 5,5 kg

Dimensi produk: 29,0x63,5x29,0 (LxTxD) cm

Berat dan dimensi

Jml. pada palet Euro: 18 pcs

Dimensi F-box (=A-box): 33,9x80,0x36,5 (LxTxD) cm

Berat F-box (=A-box): 6,5 kg

Spesifikasi teknis

Penyekat: Kelas II (isolasi ganda)

Masa pakai lampu: 500 hour(s)

Perawatan separuh badan

Lampu halogen inframerah: 650 W

Area pengobatan: 60x40 cm

Pengaman

Bersertifikasi IEC: Sesuai IEC 60601 dan 60335

Data logistik

Negara asal: Jerman

Peralatan medis

Aturan Perangkat Medis: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Data logistik

Kode CTV: 884364101000

Pereda nyeri yang efektif

Kehangatan yang meresap ke dalam

Kontrol pengobatan

Timer digital: dengan mati otomatis

Dimmer dengan 3 pengaturan kehangatan
Fungsi Pause (Jeda)

