

PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Prestige

Con tecnología SenseIQ

Cuerpo y rostro

Con sensor SmartSkin

Uso con cable y de forma inalámbrica

BRI950/00



Disfruta 6 meses de una piel suave y sin vello*

2 accesorios inteligentes para resultados óptimos

Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro IPL de más alto rendimiento. Diseñado para un tratamiento cómodo en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva de tu cuerpo y adaptan los programas personalizados para cada zona del cuerpo.

Máxima libertad, mínimas molestias

- Con sensor SmartSkin
- La aplicación Lumea IPL te acompaña en cada paso
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Piel suave por más tiempo con la tecnología IPL de Lumea


- Tecnología IPL experta para uso en casa, desarrollada con dermatólogos
- Úsala con cable o de forma inalámbrica
- Tratamiento eficaz y seguro comprobado
- Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel
- Tecnología SenseIQ para tratamientos de depilación personalizados

Tratamiento IPL profesional para las zonas del cuerpo

- Los accesorios inteligentes adaptan los programas para cada zona del cuerpo
- Accesorio para el cuerpo con diseño curvo
- Accesorio de precisión para el rostro con filtro adicional


Destacados

Lumea evita la reaparición del vello*

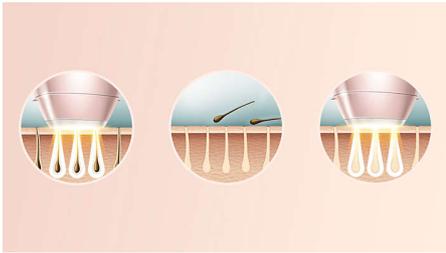

Las siglas IPL corresponden a Intense Pulse Light (luz pulsada intensa). Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que provoca que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro, incluso para las zonas más sensibles. Philips Lumea se ha probado clínicamente y se ha desarrollado junto con dermatólogos para proporcionar un tratamiento fácil y efectivo desde la comodidad de tu propio hogar.

Efectividad demostrada

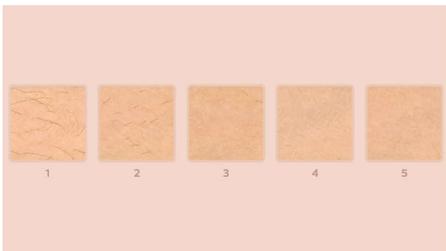

En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos**. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello*.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.

Tecnología SenseIQ



Detecta. El sensor SmartSkin de Lumea detecta tu tono de piel e indica el ajuste de luz más cómodo para ti. Se adapta. Los accesorios inteligentes adaptan los programas diseñados para cada zona del cuerpo. Te cuida. Se desarrolló en conjunto con dermatólogos y se inspiró en ti para lograr la eliminación del vello de forma suave y duradera, incluso en zonas sensibles***.

Tratamiento de las zonas del cuerpo



El cuerpo es único y la piel, las curvas y los contornos deben tratarse de la misma manera. Los accesorios para todo el cuerpo de Lumea

están diseñados para adaptarse perfectamente a cada curva y ajustarán los programas diseñados para cada zona del cuerpo. Las ventanas del tratamiento están diseñadas para maximizar el contacto con tu piel para asegurar que la luz no se escape, con el fin de permitir tratamientos suaves y eficaces incluso en zonas delicadas o sensibles.

Accesorio para el cuerpo



El accesorio inteligente para el cuerpo tiene la ventana de tratamiento más grande (4.1 cm²), por lo que es perfecto para un tratamiento rápido en zonas del cuerpo de mayor tamaño, como las piernas, los brazos y el abdomen. El diseño curvo se adapta a los contornos del cuerpo para obtener el máximo contacto con la piel. Cuando lo acoplas al dispositivo, adapta un tratamiento diseñado para estas zonas del cuerpo. El 83% de las mujeres está satisfecha con la reducción del vello en las piernas****.

Accesorio para el rostro



El accesorio para rostro se diseñó cuidadosamente para conseguir una ventana pequeña y plana de 2 cm², a fin de que puedas tratar el vello facial de manera eficaz y suave. Es ideal para el labio superior, el mentón y la mandíbula, además cuenta con un filtro adicional integrado en su interior. Cuando lo acoplas al dispositivo, el accesorio inteligente adapta automáticamente el tratamiento de luz a tu rostro. El 84% de las mujeres está satisfecha con la reducción del vello facial****.

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento corporal: Tamaño de la ventana: 4.1 cm², Forma: curva convexa, Tratamiento personalizado para el cuerpo

Accesorio para tratamiento facial: Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Forma: plana, Tratamiento personalizado para la cara

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Abdomen

Zonas sensibles: Axilas, Bikini

Zonas del rostro: Mentón, Bozo, Línea de la mandíbula

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a

tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para aplicación rápida

Uso con y sin cables: Uso con y sin cable

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/>250 000 pulsos****

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Estuche de lujo

Adaptador: 19.5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Axila: 2,5 min.

Línea del bikini: 2 min

Zonas del rostro: 1,5 min.

Parte inferior de las piernas: 8,5 min



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas

** En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más

*** Cuando se siguió el cronograma de tratamiento

**** En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro

***** La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips