

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea IPL 7000
Series

5 manuelle
intensitetsindstillinger

3 tilbehørsdele: krop, ansigt,
bikininilje

Lumea IPL-app

Brug med ledning



BRI923/00



Fantastiske resultater, fantastisk værdi

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 3 tilbehørsdele
- Leveres med Satin Compact-pentrimmer
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen


Vigtigste nyheder

3 dedikerede tilbehørsdele




Forskellige hoveder til kroppen, ansigtet og bikinilinen arbejder skånsomt med hastighed og præcision, selv på sensitive områder. Ansigtstilbehøret har et integreret lysfilter, som giver præcis behandling.

Philips Lumea IPL-appen

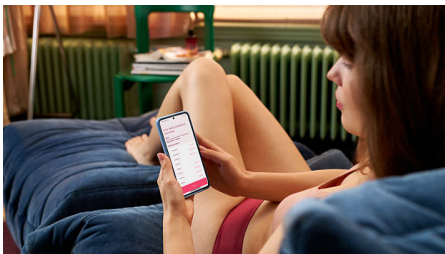

Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

Udviklet i samarbejde med dermatologer

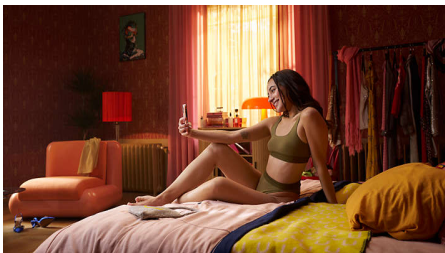

Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem,

effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

2x om måneden for hurtige resultater



Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 15 minut at dække begge underben.

Hudfarvesensor



Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Ekstra langt kabel



Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredegtighed.

Til mange hud- og hårtyper

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrun (I-IV).

Satin Compact-pentrimmer



Fuldend din skønhedspleje: Satin Compact-trimmeren er et diskret skønhedsværktøj til brug på farten, der hurtigt og nemt fjerner selv de fineste ansigtshår.

Specifikationer

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Brug med ledning

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Pentrimmer

Tilbehør: Kam til øjenbryn, Rensebørste

Brugervenlig: Kompakt håndtag

Strøm: AAA batteri

Strøm

Brug med ledning

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Bygget til at holde, 250.000 blink, svarende til 20 års pærelevetid**

Spænding: 100-240 V

Tilbehør

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Ansigtstilbehør (2 cm²): Til brug under øjnene

Tilbehør til bikinilinjen (2 cm²): Særlig behandling af hår i bikinilinjen

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Skønhedsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Tilbehør: Renseklud

Anvendelsestid

Bikininilje: 4 min.

Underben: 15 min.

Under armene: 2,5 min.

Bikini line: 4 min

Face areas: 2 min

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropstilbehør: Vinduesstørrelse: 4,0 cm²,

Behandling af kroppen: ben, arme, mave og under armene

Ansigtstilbehør: Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

Bikinitilbehør: Vinduesstørrelse: 2 cm²,

Behandling af bikiniområdet



* Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben

** Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.