

PHILIPS



IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met SenseIQ-technologie

Oksels, bikinilijn, lichaam, gezicht

Met SmartSkin-sensor

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRI956/00

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.

Vier intelligente opzetstukken - voor optimale resultaten

Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- De Lumea IPL-app. Voor alle te volgen stappen
- Met SmartSkin-sensor

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie


- Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen
- Gebruik draadloos of met snoer
- Bewezen zacht en effectief
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- SenseIQ-technologie voor een persoonlijke ontharing

Professionele IPL-behandeling voor verschillende lichaamsdelen

- Opzetstuk met een extra lichte filter voor de bikinilijn
- Lichaamsopzetstuk met naar binnen gebogen ontwerp
- Slimme opzetstukken stemmen de behandeling af op elk lichaamsdeel
- Opzetstuk voor oksels met naar buiten gebogen ontwerp


Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes*

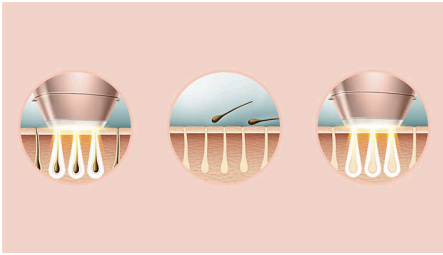

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen effectiviteit

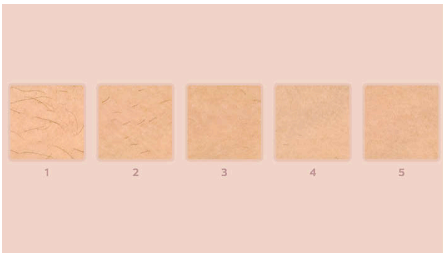


Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

SenseIQ-technologie

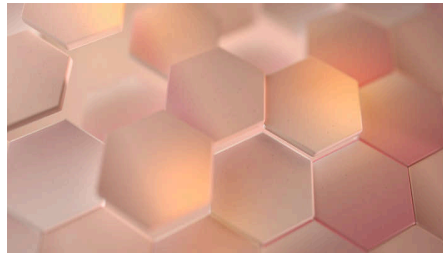

Zintuigen. De SmartSkin-sensor van Lumea detecteert uw huidskleur en bepaalt de meest comfortabele lichtinstelling voor u. Past zich aan. Intelligente opzetstukken zorgen voor een op maat gemaakt behandelingsprogramma dat is afgestemd op ieder deel van uw lichaam. Verzorgt. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en geïnspireerd door u voor een zachte, langdurige ontharing, zelfs op gevoelige plekken***.

Behandeling van lichaamsdelen

Uw lichaam is uniek en uw huid, rondingen en contouren verdienen daarom ook een unieke behandeling. De opzetstukken van Lumea voor het volledige lichaam passen perfect in alle rondingen en hebben voor ieder lichaamsdeel een op maat gemaakt programma. Behandelingsvensters zijn ontworpen om het contact met uw huid te maximaliseren, zodat het

licht niet kan ontsnappen en effectieve en zachte behandelingen mogelijk zijn, zelfs op tere of gevoelige gebieden.

Opzetstuk voor oksels

Speciaal ontworpen voor de behandeling van moeilijk te bereiken delen van uw lichaam zoals de oksel. Het slimme opzetstuk voor de oksel is middelgroot met een venstergrootte van 3 cm². Zodra het opzetstuk op het apparaat wordt geklikt, volgt een op maat gemaakt programma voor uw oksel. 86% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid okselhaar****.

Hulpstuk voor bikinilijn

Klik het slimme opzetstuk voor de bikinilijn vast en er volgt een op maat gemaakt programma speciaal voor dat gebied. Het heeft een optimale venstergrootte van 3 cm² met een transparante filter voor extra comfort en het gebogen design past zich aan de contouren van uw lichaam aan, voor maximaal contact, efficiëntie en comfort. 78% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid haar in de bikinilijn****.

Lichaamsopzetstuk

Het slimme lichaamsopzetstuk heeft met 4,1 cm² het grootste behandelvenster en is dus ideaal voor een snelle behandeling van grote lichaamsdelen, zoals benen, armen en buik. Het naar binnen gebogen ontwerp volgt de contouren van het lichaam voor optimaal huidcontact. Wanneer dit opzetstuk op het apparaat wordt geplaatst, wordt automatisch een behandeling geactiveerd die geschikt is voor deze lichaamsdelen. 83% van de vrouwen is tevreden met de haarvermindering op de benen****.

Hulpstuk voor het gezicht

Het opzetstuk voor het gezicht is zorgvuldig ontworpen voor een klein, plat venster van 2 cm² zodat u het haar op uw gezicht effectief en voorzichtig kunt behandelen. Ideaal voor de bovenlip, kin of kaaklijn. Ook heeft het opzetstuk een extra geïntegreerde filter en bij plaatsing op het apparaat wordt de lichtbehandeling voor uw gezicht automatisch aangepast. 84% van de vrouwen was tevreden met afname van de hoeveelheid haar op haar gezicht****.

Kenmerken

SmartSkin-sensor

Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie heeft vijf eenvoudig te kiezen lichtinstellingen. De SmartSkin-sensor detecteert uw huidskleur en geeft vervolgens de meest comfortabele lichtinstelling aan voor het gebied dat u behandelt.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Lumea Prestige is de enige draadloze IPL. Moeilijker te bereiken delen van het lichaam kunnen daarom gemakkelijk worden behandeld zonder dat u wordt gehinderd door een snoer.

Bovendien kunt u vanwege het draadloze karakter uw lichaamshaar op elke plek in uw huis gemakkelijk verwijderen.

Philips Lumea IPL-app

De gratis Lumea IPL-app maakt het nog gemakkelijker om tot zes maanden lang een langdurige gladde huid* te krijgen, allemaal vanuit het comfort van uw huis. De intuïtieve app kan u bij elke stap helpen met tips en trucs over uw techniek, terwijl de gepersonaliseerde behandelingsprogramma's en plannings uw ideale behandelmomenten beheren. Zo bent u op de snelst mogelijke manier altijd klaar.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende onderdelen, navullingen of gels nodig. Zelfs geen vervangende lamp is nodig.

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht

Opzetstuk voor oksels: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling voor de oksels

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor de bikinilijn

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buikstreek

Delen van het gezicht: Kin, Bovenlip, Kaaklijn

Gevoelige gebieden: Oksels, Bikini

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan 450.000 pulsen afgeven, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar*****

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksel: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.

