

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met SenseIQ-technologie

Oksels, bikinilijn, lichaam,
gezicht

Met SmartSkin-sensor

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRI959/00



Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Vier intelligente opzetstukken - voor optimale resultaten

Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Met SmartSkin-sensor
- De Lumea IPL-app. Voor alle te volgen stappen
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie


- Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen
- Gebruik draadloos of met snoer
- Bewezen zacht en effectief
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- SenseIQ-technologie voor een persoonlijke ontharing

Professionele IPL-behandeling voor verschillende lichaamsdelen

- Slimme opzetstukken stemmen de behandeling af op elk lichaamsdeel
- Opzetstuk voor oksels met naar buiten gebogen ontwerp
- Opzetstuk met een extra lichte filter voor de bikinilijn
- Lichaamsopzetstuk met naar binnen gebogen ontwerp


Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes*

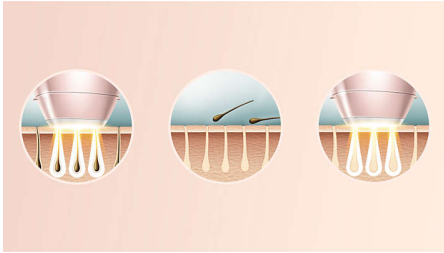


IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haavrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen effectiviteit

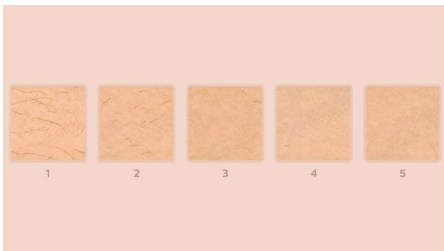

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.


Geschikte haar- en huidtypen

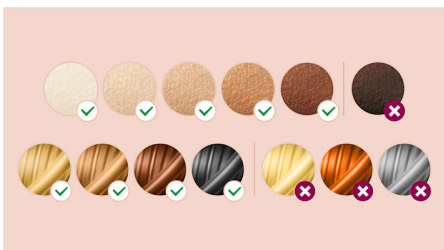

Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en

zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

SenselQ-technologie

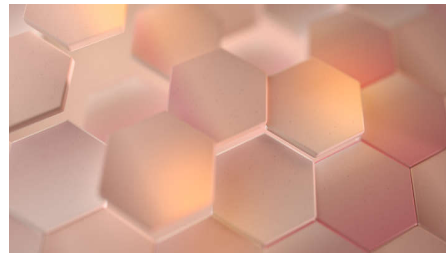

Zintuigen. De SmartSkin-sensor van Lumea detecteert uw huidskleur en bepaalt de meest comfortabele lichtinstelling voor u. Past zich aan. Intelligente opzetstukken zorgen voor een op maat gemaakt behandlingsprogramma dat is afgestemd op ieder deel van uw lichaam. Verzorgt. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en geïnspireerd door u voor een zachte, langdurige ontharing, zelfs op gevoelige plekken***.

Behandeling van lichaamsdelen



Uw lichaam is uniek en uw huid, rondingen en contouren verdienen daarom ook een unieke behandeling. De opzetstukken van Lumea voor het volledige lichaam passen perfect in alle rondingen en hebben voor ieder lichaamsdeel een op maat gemaakt programma. Behandelingsvensters zijn ontworpen om het contact met uw huid te maximaliseren, zodat het licht niet kan ontsnappen en effectieve en zachte behandelingen mogelijk zijn, zelfs op tere of gevoelige gebieden.

Opzetstuk voor oksels



Speciaal ontworpen voor de behandeling van moeilijk te bereiken delen van uw lichaam zoals de oksel. Het slimme opzetstuk voor de oksel is middelgroot met een venstergrootte van 3 cm². Zodra het opzetstuk op het apparaat wordt geklikt, volgt een op maat gemaakt programma voor uw oksel. 86% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid okselhaar****.

Hulpstuk voor bikinilijn



Klik het slimme opzetstuk voor de bikinilijn vast en er volgt een op maat gemaakt programma speciaal voor dat gebied. Het heeft een optimale venstergrootte van 3 cm² met een transparante filter voor extra comfort en het gebogen design past zich aan de contouren van uw lichaam aan, voor maximaal contact, efficiëntie en comfort. 78% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid haar in de bikinilijn****.

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht

Opzetstuk voor oksels: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling voor de oksels

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor de bikinilijn

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buikstreek

Gevoelige gebieden: Oksels, Bikini

Delen van het gezicht: Kin, Bovenlip, Kaaklijn

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan > 250.000 pulsen afgeven*****

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksel: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.



* Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels

** Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger

*** Bij het volgen van het behandelingschema

**** Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen op het gezicht

***** De levenslange garantie op de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet