

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Advanced

Für Körper und Gesicht

Mit Hautsensor

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Mit Satin Compact
Korrekturtrimmer



BRI921/00



Mindestens 3 Monate lang haarfrei*

Mindestens 85 % weniger Haare nach 3 Behandlungen**

Philips Lumea Advanced verhindert effektiv das Nachwachsen von Haaren am Körper. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig glatte Haut, jeden Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Für zahlreiche verschiedene Haar- und Hauttypen geeignet
- KOSTENLOSE Lumea-App als persönlicher Assistent
- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt

Sicher, schnell und effektiv am Körper und im Gesicht


- Integrierter Hautsensor
- Nachweislich sichere und wirksame Behandlung

Spezialisierte Behandlung unterschiedlicher Körperbereiche

- Sicher und effektiv auch an empfindlichen Stellen
- Großes Behandlungsfenster für eine schnelle Anwendung
- Präzisionsaufsatz für zusätzliche Sicherheit bei Gesichtsbehandlungen
- Sonderedition mit Satin Compact Korrekturtrimmer


Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

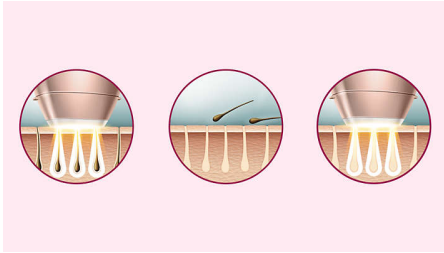

IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit

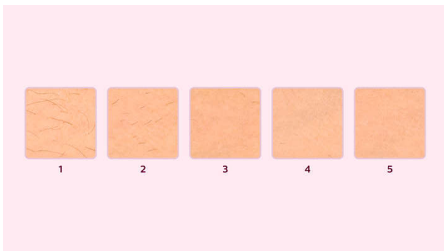

Unabhängige Studien belegen mindestens 85 % weniger Haare nach nur drei Behandlungen**. Die ersten vier Behandlungen müssen alle zwei Wochen durchgeführt werden. Danach sollten Sie bereits die gewünschten Ergebnisse sehen. Um die Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier Wochen. Nach nur acht Behandlungsauffrischungen sind Sie

mindestens drei Monate lang haarfrei*. Um dieses Bild zu vergrößern, klicken Sie oben auf dieser Seite auf das Bild in der Galerie.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea Advanced kann bei vielen Haar- und Hauttypen verwendet werden. Geeignet für (von Natur aus) dunkelblonde, braune und schwarze Haare und für Hauttöne von sehr weiß bis mittelbraun. Aufgrund des erforderlichen hohen Kontrasts zwischen Haar- und Hautpigmenten ist Philips Lumea, wie andere lichtbasierte Behandlungsmethoden auch, weder für die Behandlung von weißen/grauen, hellblonden oder roten Haaren noch für die Behandlung von sehr dunkler Haut geeignet.

Hauttensensor



Der integrierte Sensor den Hautton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit diesem Produkt ist, werden automatisch keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

Anwendungsbereiche



Fühlen Sie sich bei der Entfernung von Gesichtsbehaarung (Oberlippe, Kinn und Koteletten) sowie Körperbehaarung an Beinen, Unterarmen, Bikinizone, Bauch und Armen sicher.

Schnelle Behandlung der Beine



Großes Behandlungsfenster für eine schnelle Anwendung in großflächigen Bereichen wie den Beinen.

Überaus sicher für Gesichtsbehandlungen



Mit seinem zusätzlichen, integrierten Lichtfilter ist der Aufsatz optimal für die sichere Entfernung der Gesichtsbehaarung an Oberlippe, Kinn, Wangen und anderen empfindlichen Stellen geeignet.

Daten

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Bikini, Achselhöhlen, Arme, Beine, Bauch

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Für den Gebrauch unterhalb der Augen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Aufbewahrungsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Zubehör: Reinigungstuch

Leistung

Verwendung mit Kabel

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Achselhöhle: 2,5 Min.

Anwendungsdauer

Unterschenkel: 15 Min.

Gesichtsbereiche: 2 Min.

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Zur einfachen Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Korrekturtrimmer

Zubehör: Eyebrow comb, Cleaning brush

Benutzerfreundlichkeit: Kompakter Griff

Leistung: AAA-Batterie

