

PHILIPS

IPL-
hårfjerningssystem

Lumea Precision
Plus

Kun til krop, ansigt og bikinisnit

15 minutter for at behandle
underbenene

Klinisk dokumenteret resultat

120 dages garanti med pengene
tilbage



SC2008/11



Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst for glat hud derhjemme

Philips Lumea IPL er den mest effektive, ledningsfrie IPL-løsning, der gør underværker for at forhindre ny hårvækst i ansigtet og på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Glathed, der holder længe

- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv

Hårfjernelse med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

Mild og effektiv på kroppen, i ansigtet og i bikinilinjen

- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- Større kropstilbehør for hurtigere behandling
- Ansigtstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Tilbehør til specialbehandling af hår i bikinilinjen
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger

Maksimal frihed, minimalt besvær

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

Vigtigste nyheder

Glathed, der holder længe



Philips Lumea påvirker hårrøden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlinger afhænger af individuel hårvækst.

IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har

arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 kvinder.

Velegnede hår- og hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår fra ansigtet (overlæben, hagen og bakkenbarter) og fra områder på kroppen, herunder benene, armhulerne, bikinilinjens, maven og armene.

Hurtig behandling på ben

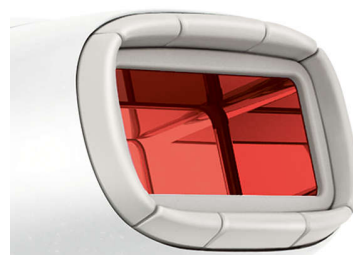

Større kropstilbehør for hurtigere behandling på store områder som f.eks. ben.

Ekstra sikkerhed til ansigtet



Ansigtstilbehøret er udstyret med sit eget, specielt designede, integrerede lysfilter, der giver sikker og komfortabel brug på overlæbe, hage og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne og på steder, som er svære at nå.

Tilbehør til bikinilinjens



Bikinilinetilbehør til effektiv fjernelse af hår i bikinilinjens. Hår i dette område har en tendens til typisk at være stærkere og kraftigere end hår på benene.

5 lysenergi-indstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Ben, Arme, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: Til praktisk anvendelse

Step and Flash: Til behandling på ujævne områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Ledningsfri

Strøm

Voltage: 100-240 V

Opladningstid: 100 min.

Driftstid: Minimum 370 blink

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver <gt/> 140.000 blink

Tilbehør

Kropstilbehør (4 cm2): Til brug fra halsen og nedefter

Tilbehør til bikinilinjen (2 cm2): Særlig behandling af hår i bikinilinjen

Ansigtstilbehøret (2 cm2): For sikker anvendelse i ansigtet

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige netspændinger

Instructions for use: Lynhåndbog,

Brugervejledning

Opbevaring: Etui

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1 min.

Bikini line: 1 min.

Face areas: 1 min.

