

PHILIPS



Épilateur à lumière
pulsée avec SenseIQ

Lumea IPL 8000
Series

Capteur SmartSkin

4 accessoires intelligents : corps,
visage, maillot, aisselles

Application Lumea IPL

Fonctionnement sur secteur



BRI949/00

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea Series 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.

Doux et efficace pour une peau lisse pendant longtemps

- Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois
- Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité
- Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Une solution complète pour le visage et le corps

- Une solution complète pour le visage et le corps avec 4 accessoires intelligents
- Fourni avec tondeuse-stylo Satin Compact
- Convient à la plupart des types de peau et de poils

Épilation personnalisée à lumière pulsée

- Douceur et confort avec la technologie SenseIQ
- Optimisez votre routine de soins avec l'application Philips Lumea IPL


Lumea IPL 8000 Series

Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI949/00

Points forts

Des résultats rapides avec 2 séances par mois

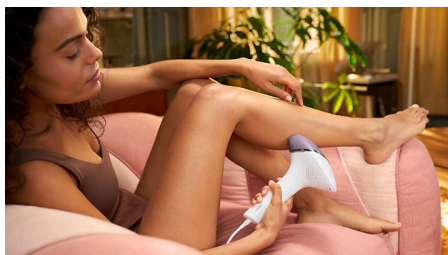


Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C'est tout. S'occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Technologie SenseIQ



L'épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d'intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l'épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong

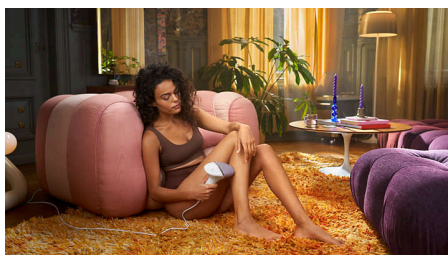

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

4 accessoires intelligents




Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre. Maillot et aisselles : conception courbée vers l'extérieur pour les zones difficiles d'accès.

Développé en étroite collaboration avec des experts



En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l'épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

Application Philips Lumea IPL

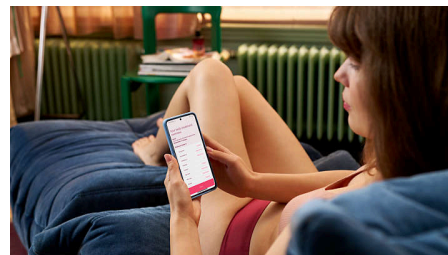

Notre application d'apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d'utilisateurs.

Tondeuse-style Satin Compact



Complétez votre routine de soins : la tondeuse-stylo Satin Compact est un accessoire de beauté discret et pratique qui vous permet d'éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins de votre visage.

Pour la plupart des types de peau et de poils



La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à foncés (I-V).

Caractéristiques

Caractéristiques techniques des accessoires

Accessoire corps: Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm², Utilisation adaptée au corps : jambes, bras et ventre

Accessoire visage: Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire

Embout pour le traitement du maillot: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée aux zones sensibles du maillot

Embout pour le traitement des aisselles: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée aux aisselles

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes

accidentels

Capteur SmartSkin: Indication de réglage adaptée à la demande

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation rapide

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les petites zones

Utilisation avec ou sans fil: Fonctionnement sur secteur

Spécificités techniques

Tension: 100-240 volt

Lampe haute performance: Conçu pour durer, 450 000 flashes, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 39 ans**

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Pochette de rangement

Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA

Durée d'utilisation

Aisselles: 2,5 min

Maillot: 2 min

Parties du visage: 1,5 min

Demi-jambes: 8,5 min

Tondeuse de précision

Facile d'utilisation: Poignée compacte

Alimentation: Pile AAA

Accessoires: Sabot pour sourcils, Brossette de nettoyage

