

# PHILIPS

IPL plaukelių  
šalinimo prietaisas

Lumea Prestige

Su technologija „SenseIQ“

Kūnas ir veidas

Turi „SmartSkin“ jutiklį

Naudojamas be laido ir su laidu

BRI950/00



## 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių\*

2 išmanieji priedai optimaliems rezultatams pasiekti

„Philips Lumea Prestige“ su „SenseIQ“ technologija yra mūsų pats veiksmingiausias IPL prietaisas. „Lumea“ išmanieji priedai, skirti patogioms procedūroms namuose, tobulai prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio ir pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas programas.

### **Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai**

- Turi „SmartSkin“ jutiklį
- Programa „Lumea IPL“. Su jumis kiekviename žingsnyje
- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų

### **Ilgai išliekanti glotni oda su „Lumea“ IPL technologija**


- Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais
- Naudokite su laidu arba be jo
- Įrodyta, kad procedūra yra švelni ir veiksminga
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų
- Individualiam plaukelių šalinimui skirta „SenseIQ“ technologija

### **Profesionalios IPL procedūros įvairioms kūno sritims**

- Su išmaniais priedais pritaikysite programas kiekvienai kūno vietai
- Įgaubto dizaino kūnui skirtas priedas
- Tikslus veidui skirtas priedas su papildomu filtru

## Ypatybės


### „Lumea“ neleidžia plaukeliams ataugti\*

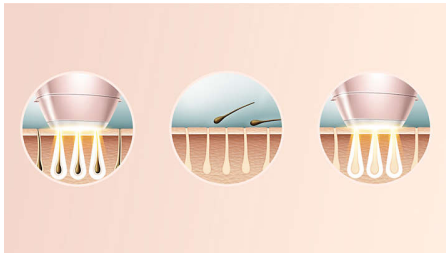

IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose.


„Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.

### Įrodytas veiksmingumas

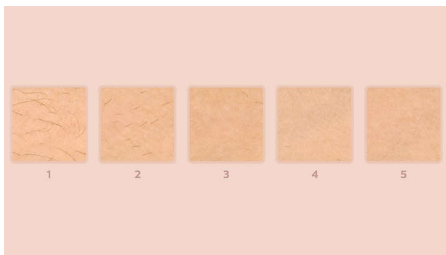

Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92%\*\* . Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi savaites, o kitas aštuonias – kas keturias savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių\* .


### Tinka įvairiems plaukų ir odos tipams

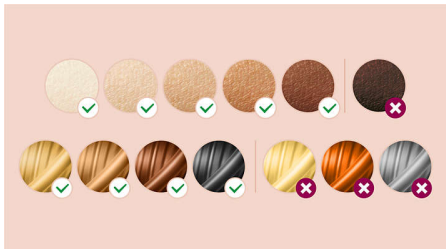

„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus

plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento kontrastas, todėl (kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“ nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais, šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.

### „SenseIQ“ technologija

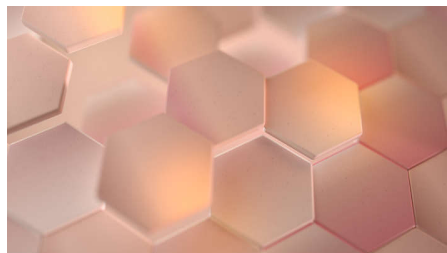

Pajaučia. „Lumea SmartSkin“ jutiklis aptinka odos atspalvį ir nurodo jums patogiausią šviesos nustatymą. Pritaiko. Išmanieji priedai pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas programas. Rūpinasi. Bendradarbiaujant su dermatologais sukurtas ir jūsų įkvėptas švelniam, ilgalaikiam plaukelių šalinimui net jautriose vietose\*\*\*.

### Kūno sričių procedūros



Jūsų kūnas yra unikalus. Jo odai, linkiams ir kontūrams taip pat turėtų būti taikomos unikalios procedūros. „Lumea“ visam kūnui skirtų priedų formos tokios, kad jie tobulai tiktų kiekvienam linkiui, o programos būtų pritaikomos kiekvienai kūno vietai. Procedūrų langeliai sukurti taip, kad kontaktas su oda būtų didžiausias ir šviesa neišsisklaidytų, kad procedūros būtų veiksmingos ir švelnios net atliekant jas pažeidžiamose ar jautriose vietose.

### Kūno priedas



Išmaniajame kūnui skirtame priede yra mūsų didžiausias, 4,1 cm<sup>2</sup>, procedūrų langelis, tad jis puikiai tinka greitoms procedūroms dideliuose kūno plotuose, pvz., ant kojų, rankų ir pilvo. Dėl įgaubto dizaino jis gerai prisitaiko prie kūno linkių, kad sąlytis su oda būtų didžiausias. Uždėkite priedą ir bus pritaikyta individuali programa konkrečiai kūno vietai. 83 % moterų yra patenkintos sumažėjusiu plaukelių kiekiu ant kojų\*\*\*\*.

### Veidui skirtas priedas



Apgalvotai sukurtas veidui skirtas priedas turi mažą, plokščią, 2 cm<sup>2</sup> ploto langelį, kad galėtumėte veiksmingai ir švelniai atlikti veido plaukelių procedūras. Jis puikiai tinka viršutinei lūpai, smakruvi ar žandikaulio linijai. Be to, priede yra sumontuotas papildomas filtras. Uždėjęs išmanųjį priedą ant prietaiso, automatiškai pritaikoma šviesos procedūra veidui. 84 % moterų yra patenkintos sumažėjusiu plaukelių kiekiu ant veido\*\*\*\*.

# Specifikacijos

## Techninės priedų specifikacijos

**Kūno procedūros priedas:** Langelio dydis: 4,1 cm<sup>2</sup>, Forma: išgaubtas, Kūnui pritaikyta procedūra

**Veido procedūros priedas:** Langelio dydis: 2 cm<sup>2</sup>, papildomas filtras, Forma: plokščias, Veidui pritaikyta procedūra

## Taikymo sritys

**Kūno sritys:** Rankoms, Kojos, Pilvui

**Jautrios sritys:** Pažastys, Bikinis

**Veido sritys:** Smakras, Viršutinė lūpa, Žandikaulio linija

## Saugūs ir reguliuojami nustatymai

**Integruotas UV filtras:** Apsaugo odą nuo UV spindulių

**5 šviesos energijos nustatymai:** Pritaikoma prie

jūsų odos tipo

**Integruota saugos sistema:** Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

**Odos atspalvio jutiklis:** Nustato jūsų odos atspalvį

**„SmartSkin“ jutiklis:** Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

## Naudojimo režimas

**Slinkti ir šviesti:** Greitam naudojimui

**Laidinis / belaidis naudojimas:** Naudojamas be laido ir su laidu

**Priglausti ir šviesti:** Procedūroms mažame plote

## Maitinimas

**Įtampa:** 100-240 V

## Techniniai duomenys

**Didelio našumo lempa:** Atlieka <gt/> 250 000 blyksnių\*\*\*\*

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2 metų tarptautinė garantija

## Pridėti priedai

**Naudojimo instrukcijos:** Vartotojo vadovas

**Laikymas:** Prabangus įdėklas

**Adapteris:** 19,5 V / 4000 mA

## Procedūros laikas

**Pažastis:** 2,5 min.

**Bikini linija:** 2 min.

**Veido sritys:** 1,5 min.

**Apatinės kojų dalys:** 8,5 min.

