

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea IPL 7000
Series

5 manuaalista tehoasetusta

3 lisäosaa: vartalo, kasvot,
bikinialue

Lumea IPL -sovellus

Johdolliseen käyttöön



BRI923/00



Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Kullekin kehonosalle on oma lisäosansa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
- Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kolme lisäosaa
- Mukana Satin Compact -kynätrimmeri
- Sopii monenlaisille ihon sävyille ja monenvärisille ihokarvoille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta
- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella


Kohokohdat

Kolme lisäosaa vartalon eri alueille




Eri ajopäät vartalolle, kasvoille ja bikinialueelle toimivat tietyllä nopeudella ja tarkkuudella ja ovat siksi hellävaraisia käyttää myös herkällä vartalon alueilla. Kasvoille tarkoitettu lisäosassa on sisäänrakennettu valosuodatin tarkkaan käsittelyyn.

Philips Lumea IPL -sovellus

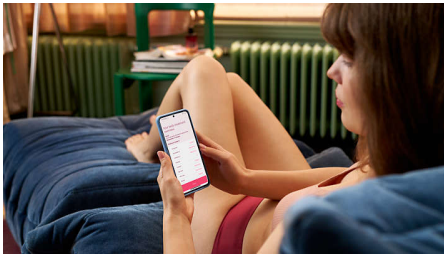

Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa

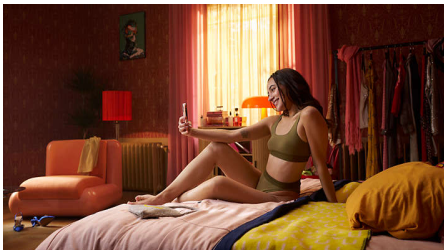

Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä

ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäyttöä. Kauneushoitoissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 15 minuuttia.

Ihon sävyn tunnistin



Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

Erittäin pitkä johto



Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Useille iho- ja karvatyypeille

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta keskiruskeaan (I–IV).

Satin Compact -kynätrimmeri



Täydennä kauneudenhoitorutiiniasi: Satin Compact -kynätrimmeri on huomaamaton, helposti mukana kulkeva kauneudenhoitoväline, jolla voit poistaa ohuimmatkin kasvojen ihokarvat nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen käyttöön

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Kynätrimmeri

Lisätarvikkeet: Kulmakarvaharja, Puhdistusharja

Helppokäyttöinen: Pienikokoinen kahva

Virta: AAA-paristo

Virta

Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 250 000 välähdystä, mikä vastaa 20 vuoden pituista lampun käyttöikää**

Jännite: 100–240 V

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Kasvolisäosa (2 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen silmistä alaspäin

Bikini-rajalisäosa (2 cm²): Bikinialueen erikoiskäsittely

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Meikkipussi

Sovitin: 24 V / 1500 mA

Tarvike: Puhdistusliina

Käyttöaika

Bikini-rajaja: 4 min

Sääri: 15 min

Kainalot: 2,5 min

Bikini-rajat: 4 min

Kasvat: 2 min

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,0 cm², Vartalon käsittely: jalat, käsivarret, vatsa ja kainalot

Kasvolisäosa: Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvojen käsittely: ylähuuli, leuka ja leukalinja

Bikini-rajalisäosa: Ikkunan koko: 2 cm², Bikinialueen käsittely

