

PHILIPS

IPL fotoepilaator

Lumea Prestige

SenseIQ tehnoloogiaga

Kaenlaalused, bikiniipk, keha, nägu

SmartSkin-anduriga

Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega



BRI956/00



Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud* 4 nutikat tarvikut – optimaalsete tulemuste jaoks

SenseIQ tehnoloogiaga Philips Lumea Prestige on meie kõige tõhusam IPL. Mugavaks koduseks kasutamiseks loodud seade ja selle nutikad Lumea tarvikud järgivad täpselt teie kehakumerusi ning kohandavad programmi vastavalt kehapiirkonnale.

Rohkem vabadust vähema pingutusega

- Ei vaja asendusosi, puuduvad varjatud kulud
- Lumea IPL rakendus. Toetab teid igal sammul
- SmartSkin-anduriga

Sile nahk pikaks ajaks tänu Lumea IPL-tehnoloogiale


- Koostöös nahaarstidega välja töötatud professionaalne IPL-tehnoloogia kodus
- Kasutage juhtmeta või juhtmega
- Tõestatult õrn ja tõhus hooldus
- Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele
- SenseIQ tehnoloogia kohandub vastavalt teie karvadele

Professionaalne IPL-hooldus teie kehale

- Lisafiltriga bikiniipiirkonna tarvik
- Suur kumera kujuga kehatarvik
- Nutikad tarvikud kohandavad programmi vastavalt kehapiirkonnale
- Kumera kujuga kaenlaaluste tarvik


Esiletõstetud tooted

Lumea ennetab karvade tagasikasvamist*

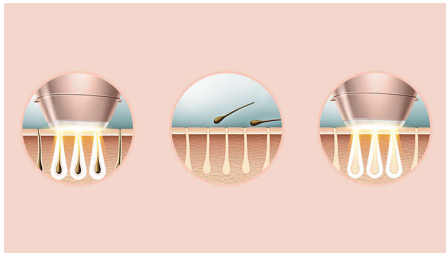


IPL tähendab intensiivset valgusimpulssi. Philips Lumea edastab karvajuurele õrna valgusimpulsi, mis viib karvanääpsu puhkeasendisse. Seetõttu väheneb nahal kasvavate karvade arv järk-järgult. Hooldust korrates jääb nahk meeldivalt karvavabaks ja pehmeks. Karvade tagasikasvamist ennetav hooldus on turvaline ja nahale õrn, isegi tundlikes piirkondades. Philips Lumea on kliiniliselt testitud ja töötatud välja koostöös nahaarstidega, et kodustes tingimustes lihtsat ja tõhusat hooldust pakkuda.

Tõestatud tõhusus

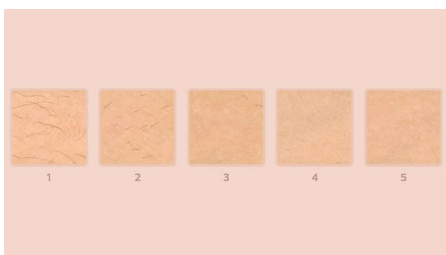

Objektiivsed uuringud näitavad kuni 92% võrra vähem karvu kõigest kolme hoolduskorraga**. Esimesed neli hoolduskorda tuleks teha iga kahe nädala tagant ja kaheksa järgmist hoolduskorda iga nelja nädala tagant. Pärast 12 protseduuri saate nautida siledat karvavaba nahka kuus kuud*.


Sobivad juukse- ja nahatüübid

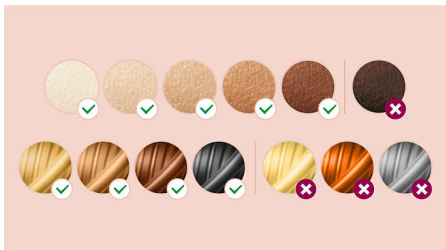

Philips Lumea Prestige toimib tõhusalt paljude karva- ja nahatüüpidega. See toimib nii loomulike tumblondide, pruunide kui ka


musta värvi karvade puhul ning samuti nii väga heledal kui ka väga tumedal nahal. Sarnaselt teiste IPL-põhiste hooldusvõimalustega ei saa Lumea seadet kasutada valgete, hallide, heleblondide ega punaste karvade eemaldamiseks ja see ei sobi väga tumedal nahal kasutamiseks. Seda seetõttu, et karvade värvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel peab olema suur kontrast.

SenseIQ tehnoloogia

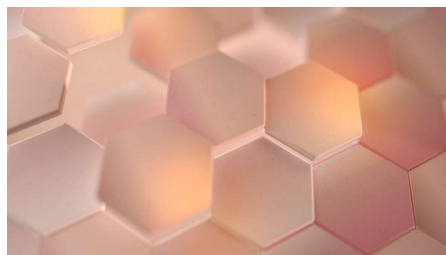

Tuvastab. Lumea SmartSkin-andur tuvastab teie nahatooni ja pakub teile mugavaima seadistuse. Kohandub. Nutikad tarvikud kohandavad programmi vastavalt igale kehapiirkonnale. Hoolditseb. Koostöös dermatoloogidega arendatud ja kasutajatest inspireeritud lahendus tagab õrna ja kauakestva karvaemalduse isegi tundlike piirkondade jaoks***.

Kehapiirkondade hooldamine

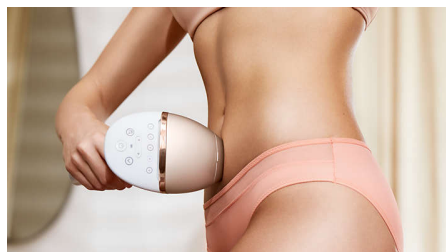

Teie keha on unikaalne. Ja seda katvat nahka, kumerusi ja piirjooni tuleks samuti lugupidamisega kohelda. Lumea kogu keha tarvikud on mõeldud järgima iga teie kumerust ja need kohandavad programmi vastavalt igale kehapiirkonnale. Töötlemisavad võimaldavad nahaga maksimaalset kontakti ja tagavad, et valgus ei pääseks välja. Nii saate nautida tõhusat ja õrna hooldust ka delikaatsetes ja tundlikes piirkondades.

Kaenlaaluste tarvik



See keskmise suuruse ja 3 cm² töötlusavaga nutikas kaenlaaluste tarvik on loodud spetsiaalselt raskesti ligipääsetava kaenlaaluse piirkonna jaoks. Seadme külge kinnitamisel aktiveerib see automaatselt kaenlaalustele sobiva hooldusprogrammi. 86% naistest olid rahul karvakasvu vähenemisega kaenlaalustes****.

Bikiinipiirkonna otsak



Kui kinnitate nutika bikiinipiirkonna tarviku seadme külge, aktiveerib see automaatselt selle piirkonna jaoks sobiva hooldusprogrammi. Selle optimaalne 3 cm² töötlusava, läbipaistev filter ja kumer disain järgivad teie keha piirjooni ning tagavad maksimaalse kontakti, tõhususe ja mugavuse. 78% naistest olid rahul karvakasvu vähenemisega bikiinipiirkonnas****.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed, lisad

Kehakarvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm², Spetsiaalne hooldus kehale

Näokarvade eemaldustarvik: Kuju: lame, Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Spetsiaalne hooldus näole

Kaenlaaugukarvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², Spetsiaalne hooldus kaenlaalustele

Bikiinipiirkonna karvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², lisafilter, Spetsiaalne hooldus bikiinipiirkonnale

Kasutuspiirkonnad

Kehapiirkonnad: Käsivarred, Jalad, Kõht

Näopiirkonnad: Lõug, Ülahuul, Lõuajoon

Tundlikud piirkonnad: Kaenlaalused, Bikiinipiirkond

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Nahatooniandur: Tuvastab teie nahatooni

Andur SmartSkin: Vajadusele vastav seadistus

Kasutusrežiim

Libista ja vältuta: Kiireks kasutamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Kasutatakse nii juhtmeta kui ka juhtmega

Markeeri ja vältuta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Toide

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Tekitab <gt/> 250 000 välgatus****

Teenindus

Garantii: 2-aastane ülemaailmne garantii

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Luksuslik kott

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Kasutusaeg

Kaenlaauk: 2,5 min

Bikiinijoon: 2 minutit

Näopiirkonnad: 1,5 min

Sääreosa: 8,5 min

