

# PHILIPS

IPL-hårfjerningssystemet:  
Gaveversion

Lumea Essential

Kun til brug på kroppen

15 minutter for at behandle  
underbenene

Levetid > 100.000 lysimpulser

Ekstra lang ledning

 Product Picture

SC1991/04



## Forebyg hårvækst

### Glat hud hver dag

Philips Lumea IPL-teknologien gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse. Gaveversion: Kompakt ladyshaver medfølger til behandling inden IPL.

#### **Nem at anvende**

- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter
- Forbered din IPL-behandling med EXTRA-shaver.

#### **Glathed, der holder længe**

- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv

#### **Hårfjernelse med IPL-teknologi**

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

#### **Sikker, hurtig og effektiv på kroppen**

- Kropstrimmer: Hurtig behandling (15 min. for 2 underben)
- Justerbar i forhold til din hudtype
- Bruges til kroppen
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger

# Vigtigste nyheder

## Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

## Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlinger afhænger af individuel hårvækst.

## IPL-teknologi

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

## Stor kropstrimmer, 4 cm<sup>2</sup>



Stor kropstrimmer giver mulighed for hurtigere behandling på store områder som f.eks. benene.

## Velegnede hår- og hudtyper

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados		Tono de piel / Tomo de pele					
		1	2	3	4	5	6
Eficacia del tratamiento / Eficácia do tratamento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contraindicaciones / Contraindicações	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Puede utilizar este producto. Este producto es adecuado para ti.   
 Este producto no es seguro ni adecuado para tu tono de piel y tipo de vello. Este producto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e o cor do seu pêlo.


Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til mørk hud.

## Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår på alle kropszoner fra halsen og nedefter: Ben, armhuler, bikinilinen, arme og mave.

## 5 lysenergiindstillinger

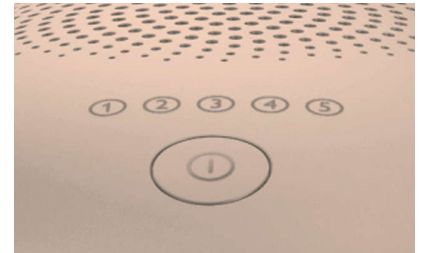

Philips Lumea har 5 justerbare lysenergiindstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

## Ingen udskiftelige dele

Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

## Gavemulighed: Ladyshaver



Forbered din IPL-behandling med EXTRA-shaver. Med den kompakte Philips-ladyshaver kan du barbere hele kroppen på en hurtig og nem måde. Du kan bruge den i badet eller til tør barbering, når det passer dig. Kompakt og batteridrevet.

# Specifikationer

## Anvendelsesområder

**Body areas:** Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filter:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

## Programtilstand

**Step and Flash:** Til behandling på ujævne områder

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Med ledning

## Strøm

**Voltage:** 100–240 V

## Tekniske specifikationer

**High performance lamp:** Giver > 100.000 blink

## Tilbehør

**Kropstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

## Service

**Garanti:** 2 års global reklamationsret

## Medfølgende dele

**Instructions for use:** Lynhåndbog,

Brugervejledning

**Opbevaring:** Etui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

## Anvendelsestid

**Underben:** 8 min.

**Armhule:** 1 min.

**Bikini line:** 1 min.

