

IPL matiņu likvidēšanas ierīce

Lumea Prestige

Ar SenselQ tehnoloģiju

Paduses, bikini, ķermenis, seja

Ar SmartSkin sensoru

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI956/00



Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus* 4 intelīgenti uzgaļi optimāliem rezultātiem

Philips Lumea Prestige ar SenselQ tehnoloģiju ir mūsu efektīvākā IPL ierīce. Lumea intelīgentie uzgaļi, kas izstrādāti ērtai lietošanai mājās, izcili pieguļ katram ķermenē izliekumam un pielāgo programmas katrai ķermenē zonai.

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām
- Lumea IPL lietotne. Kopā ar jums ik uz soļa
- Ar SmartSkin sensoru

Ilgstoši gluda āda ar Lumea IPL tehnoloģiju

- Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstāklos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem
- Izmantojiet bez vada vai ar vadu
- Pierādīti saudzīga un efektīva procedūra
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem
- SenselQ tehnoloģija personalizētai matiņu likvidēšanai

Profesionāla ķermenē zonu IPL apstrāde

- Uzgalis bikini zonai ar papildu gaismas filtru
- Ieliekta dizaina uzgalis ķermenim
- Intelīgentie uzgaļi pielāgo programmas katrai ķermenē zonai
- Izliekta dizaina uzgalis padusēm


Izceltie produkti

Lumea novērš matiņu ataugšanu*




Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsī" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu kermenā apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās kermenē zonas. Philips Lumea ir kliniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājas apstāklos.

Pierādīta efektivitāte

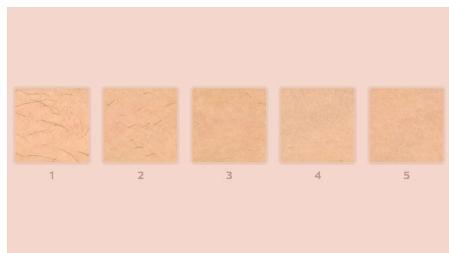

Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

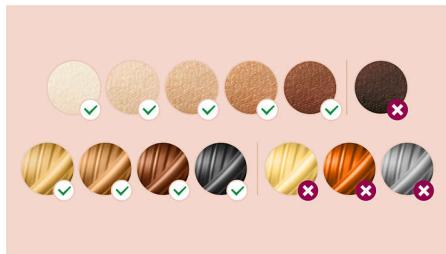

Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tipiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toniem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas tonā pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.

SenselIQ tehnoloģija



Sajūt. Lumea SmartSkin sensors nosaka jūsu ādas toni un norāda jums piemērotāko gaismas iestatījumu. Pielāgojas. Inteligētie uzgaļi pielāgo programmas katrai kermenē zonai. Rūpējas. Ierīce ir izstrādāta kopā ar dermatologiem un izveidota, iedvesmojoties no jums, lai nodrošinātu saudzīgu, ilgnoturīgu matiņu likvidēšanu pat jutīgās zonās***.

Kermenē zonu apstrāde



Jūsu kermenis ir unikāls. Arī tā āda, izliekumi un kontūras jāapstrādā unikālā veidā. Lumea uzgaļi visam kermenim ir izveidoti tā, lai tie

izcili piegultu ikvienam izliekumam, un programmas tiek pielāgotas katrai kermenē zonai. Apstrādes logi ir izveidoti, lai palīelinātu saskari ar ādu un nepielautu gaismas noplūdi, tādējādi nodrošinot efektīvu un saudzīgu apstrādi pat delikātās un jutīgās zonās.

Padušu uzgalis



Inteligētais uzgalis padusēm, kas īpaši izstrādāts grūti aizsniedzamām padušu zonām, ir vidēja lieluma, ar 3 cm² lodziņu. Kad uzgalis ir pievienots ierīcei, tas pielāgo programmu padušu zonai. 86 % sieviešu ir apmierinātas ar matiņu samazinājumu padusēs****.

Bikini zonas uzgalis



Pievienojiet intelīgento bikini uzgalī, un tas pielāgos programmu attiecīgajai zonai. Tam ir optimāls 3 cm² lodziņš ar caurspīdīgu filtru papildu komfortam, un izliektā konstrukcija pielāgojas jūsu kermenē kontūrām, nodrošinot maksimālu saskari, efektivitāti un komfortu. 78 % sieviešu ir apmierinātas ar matiņu samazinājumu bikini zonā****.

Specifikācijas

Pievienoto piederumu tehniskās specifikācijas

Kermenē apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz ārpusi, Loga izmērs: 4,1 cm², Kermenim piemērota procedūra
Sejas apstrādes papildpiederums: Forma: plakans, Loga izmērs: 2 cm², papildu filtrs, Sejai piemērota procedūra
Padušu apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm², Padusēm piemērota procedūra
Bikini apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm², papildu filtrs, Bikini zonai piemērota procedūra

Pielietojuma zonas

Kermenē zonas: Rokas, Kājas, Vēders
Sensitīvās zonas: Paduses, Bikini
Sejas zonas: Zods, Augšķūpa, Žokļa līnija

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojet savam ādas tipam
Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem
Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni
SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslidināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai
Lietošana ar vadu/bez vadu: Lietošana bez vada un ar vadu
Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Jauda

Spriegums: 100–240 V

Tehniskās specifikācijas

Augstas veikspējas lampa: Rada <gt;/> 250 000 zibšņus****

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaule

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata
Uzglabāšana: Eleganta somiņa
Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas laiks

Paduse: 2,5 min
Bikini līnija: 2 min
Sejas zonas: 1,5 min
Kāju apakšējās daļas: 8,5 min

