

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 7000 Series

5 manuell einstellbare
Intensitätsstufen

2 Aufsätze: Körper, Gesicht

Lumea IPL App

Verwendung mit Kabel



BRI922/00



Sanft, glatt und langanhaltend

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

Genießen Sie seidig glatte Haut mit unserem Lumea IPL der 7000er Serie. Sanfte und effektive Behandlungen mit Aufsätzen für jeden Körperbereich

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen.
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 2 Aufsätzen
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste enthalten

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.
- Hautsensor und 5 Intensitätsstufen


Besonderheiten

2 spezielle Aufsätze




Verschiedene Aufsätze für Körper und Gesicht ermöglichen selbst in empfindlichen Bereichen eine sanfte, schnelle und präzise Haarentfernung. Der Aufsatz für das Gesicht sorgt durch einen integrierten Lichtfilter für eine präzise Behandlung.

Philips Lumea IPL-App

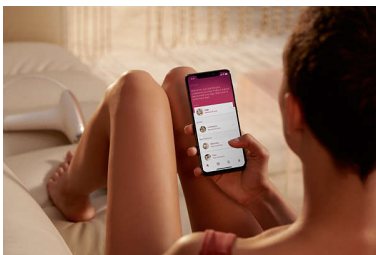

Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

Mit Dermatologen entwickelt

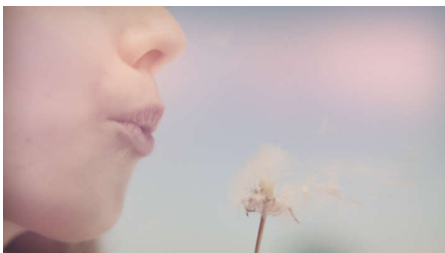

Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL


entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 15 Minuten.

Hauttensensor

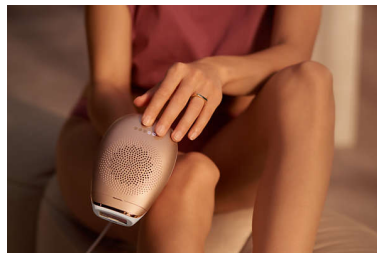

Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttensensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel



Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

Für viele Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und hellen bis mittelbraunen Hauttönen (I-IV).

VisaPure Mini Gesichtsreinigungsbürste



Für Ihre vollständige Beauty-Routine: Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist ein kompaktes Gerät zur einfachen Reinigung für sichtbar frische und weiche Haut.

Daten

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Verwendung mit Kabel

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Leistung

Verwendung mit Kabel

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Langlebiges Produkt mit 250.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 20 Jahren**

Stromspannung: 100 bis 240 V

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Für den Gebrauch unterhalb der Augen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Beauty-Tasche

Adapter: 24 V/1500 mA

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Unterschenkel: 15 Min.

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 4 Min.

Gesichtsbereiche: 2 Min.

VisaPure Mini Gesichtsreinigungsbürste

Anwendungsbereiche: Gesicht und Hals

Benutzerfreundlichkeit: Kabellos, Wasserfest, 1 Geschwindigkeitseinstellung

Artikel enthalten: Bürstenkopf für normale Haut, Netzadapter

Zubehör: Bürstenkopf für normale Haut, Netzadapter

Leistung: Netzadapter

Technische Daten der Aufsätze

Körperaufsatz: Größe des

Behandlungsfensters: 4,0 cm², Behandlung folgender Körperbereiche: Beine, Arme, Bauch und Unterarme

Aufsatz für das Gesicht: Größe des

Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Behandlung des Gesichts: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

