

# PHILIPS

IPL-  
ontharingsapparaat

Lumea IPL 7000  
Series

5 handmatige  
intensiteitsinstellingen

2 opzetstukken: lichaam, gezicht

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer

BRI924/00



## Geweldige resultaten en waar voor uw geld

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid\*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor het lichaam en gezicht.

### Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

### Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht met 2 slimme opzetstukken
- Geleverd met VisaPure-minigezichtsreiniger
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

### Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

# Lumea IPL 7000 Series

IPL-ontharingsapparaat


## Kenmerken

### 2x per maand voor snelle resultaten




De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

### Skin Tone-sensor

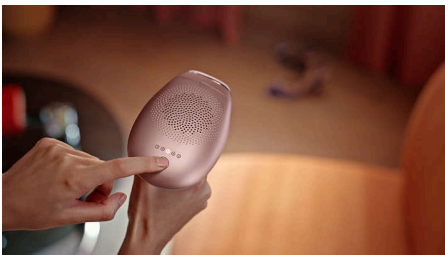


Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

### Extra lange kabel

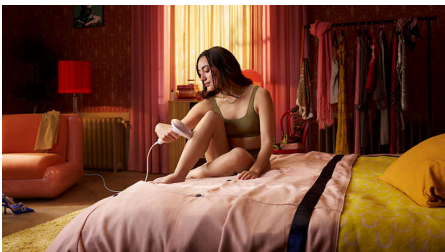


Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

### 2 speciale opzetstukken

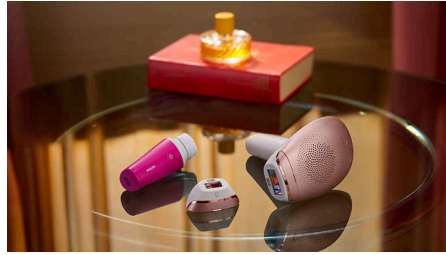

Verschillende koppen voor lichaam en gezicht werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.


### Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

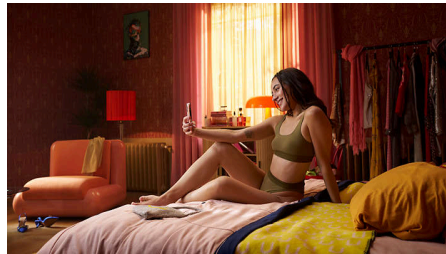

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.


BRI924/00

### Philips Lumea IPL-app

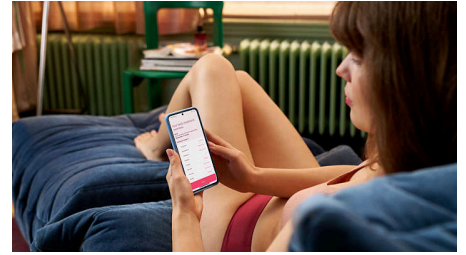

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

### VisaPure-minigezichtsreiniger

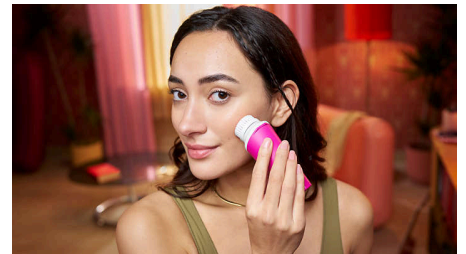

Voltooi uw schoonheidsroutine: De VisaPure-minigezichtsreiniger is een compact en zeer handig reinigingsapparaat voor een zichtbaar frisse en zachte huid.

### Voor veel huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I-IV).

## Specificaties

### Technische specificaties hulpstukken

**Hulpstuk voor lichaam:** Venstergrootte: 4,0 cm<sup>2</sup>, Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

**Hulpstuk voor het gezicht:** Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

### Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

### Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Gebruik met snoer

### Vermogen

Gebruik met snoer

### Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar\*\*

**Spanning:** 100-240 V

### Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

**Gezichtsopzetstuk (2 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de ogen

### Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

### Meegeleverde artikelen

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Opbergetui

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

### Behandeltijd

**Bikini:** 4 minuten

**Onderbeen:** 15 min.

**Oksels:** 2,5 min.

**Bikinilijn:** 4 min.

**Delen van het gezicht:** 2 min.

### VisaPure Mini Sensitive

**Toepassingsgebieden:** Gezicht en hals

**Gebruiksgemak:** Waterdicht, Draadloos,

Oplaadbaar, 1 snelheidsstand

**Meegeleverde artikelen:** Opzetborstel voor de gevoelige huid, Stroomadapter

**Accessoires:** Opzetborstel voor de gevoelige

huid, Stroomadapter

**Vermogen:** Stroomadapter

