

PHILIPS

IPL plaukelių
šalinimo prietaisas

Lumea Prestige

Su technologija „SenseIQ“

Kūnas, veidas, tikslūs
procedūros

Turi „SmartSkin“ jutiklį

Naudojamas be laido ir su laidu



BRI953/00



6 mėn. mėgautės glotnia oda be plaukelių* 3 išmanūs priedai optimaliems rezultatams

„Philips Lumea Prestige“ su „SenseIQ“ technologija yra mūsų pats veiksmingiausias IPL prietaisas. „Lumea“ išmanieji priedai, skirti patogioms procedūroms namuose, tobulai prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio ir pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas programas.

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

- Turi „SmartSkin“ jutiklį
- Programa „Lumea IPL“. Su jumis kiekviename žingsnyje
- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų

Ilgai išliekanti glotni oda su „Lumea“ IPL technologija


- Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais
- Naudokite su laidu arba be jo
- Įrodyta, kad procedūra yra švelni ir veiksminga
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų
- Individualiam plaukelių šalinimui skirta „SenseIQ“ technologija

Profesionalios IPL procedūros įvairioms kūno sritims

- Su išmaniais priedais pritaikysite programas kiekvienai kūno sričiai
- Priedas jautrioms bikinio ir pažasčių sritims
- Kūnui skirtas išgaubto dizaino priedas
- Tikslus veidui skirtas priedas su papildomu filtru

Ypatybės


„Lumea“ neleidžia plaukeliams ataugti*

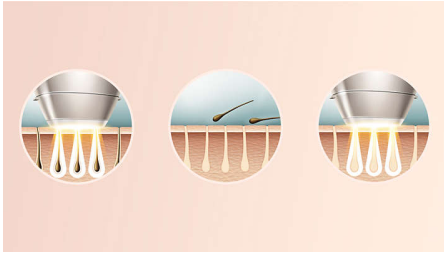

IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose.


„Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.

Įrodytas veiksmingumas

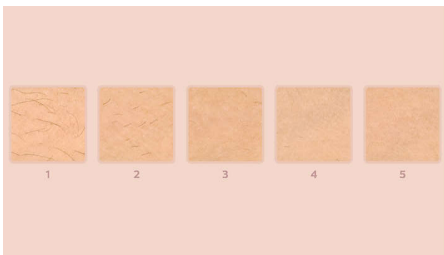

Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92%**. Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi savaites, o kitas aštuonias – kas keturias savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių*.


Tinka įvairiems plaukų ir odos tipams

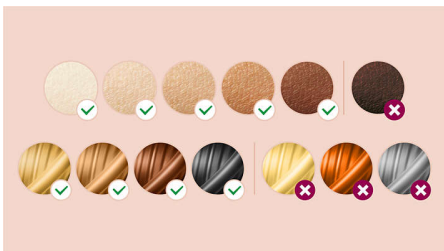

„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus

plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento kontrastas, todėl (kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“ nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais, šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.

„SenseIQ“ technologija

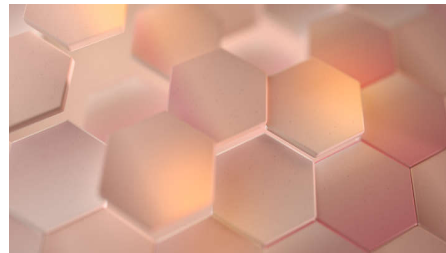

Pajaučia. „Lumea SmartSkin“ jutiklis aptinka odos atspalvį ir nurodo jums patogiausią šviesos nustatymą. Pritaiko. Išmanieji priedai pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas programas. Rūpinasi. Bendradarbiaujant su dermatologais sukurtas ir jūsų įkvėptas švelniam, ilgalaikiam plaukelių šalinimui net jautriose vietose***.

Kūno sričių procedūros



Jūsų kūnas yra unikalus. Jo odai, linkiams ir kontūrams taip pat turėtų būti taikomos unikalios procedūros. „Lumea“ visam kūnui skirtų priedų formos tokios, kad jie tobulai tiktų kiekvienam linkiui, o programos būtų pritaikomos kiekvienai kūno vietai. Procedūrų langeliai sukurti taip, kad kontaktas su oda būtų didžiausias ir šviesa neišsisklaidytų, kad procedūros būtų veiksmingos ir švelnios net atliekant jas pažeidžiamose ar jautriose vietose.

Priedas jautrioms sritims



Išmanusis priedas jautrioms sritims yra vidutinio dydžio ir turi 3 cm2 langelį, kad tiksliai uždengtų vietas bikinio srityje ir pažastyse. Lenktas dizainas gerai priglundžia prie kūno linkių, kad kontaktas su oda būtų didžiausias. Kai priedas uždedamas ant prietaiso, pritaikoma šioms kūno vietoms skirta programa.

Kūno priedas



Išmaniajame kūnui skirtame priede yra mūsų didžiausias, 4,1 cm2, procedūrų langelis, tad jis puikiai tinka greitoms procedūroms dideliuose kūno plotuose, pvz., ant kojų, rankų ir pilvo. Dėl įgaubto dizaino jis gerai prisitaiko prie kūno linkių, kad sąlytis su oda būtų didžiausias. Uždėkite priedą ir bus pritaikyta individuali programa konkrečiai kūno vietai. 83 % moterų yra patenkintos sumažėjusiu plaukelių kiekiu ant kojų****.

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno procedūros priedas: Langelio dydis: 4,1 cm², Forma: išgaubtas, Kūnui pritaikyta procedūra

Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra

Tikslios procedūros priedas: Forma: įgaubtas, tikslus, Langelio dydis: 3 cm², Pažastims pritaikyta procedūra, Bikinio plotui pritaikyta procedūra

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvui

Jautrios sritys: Pažastys, Bikinis

Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsus odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsus odos atspalvį

„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojamas be laido ir su laidu

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka <gt/> 250 000 blyksnių*****

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus įdėklas

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Procedūros laikas

Pažastis: 2,5 min.

Bikini linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.

Apatinės kojų dalys: 8,5 min.

