

# PHILIPS

## Epilator IPL

Lumea Seria 7000

2 accesorii: corp, față

Utilizare cu fir

250.000 de impulsuri

Aplicație Lumea

BRI921/00



## Rezultate extraordinare, valoare extraordinară

### Bucură-te de 12 luni de reducere a părului\*

Obține o piele fină, fără păr cu IPL Lumea Seria 7000. Tratamentele sunt delicate și eficiente cu accesorii pentru fiecare zonă a corpului.

#### **Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată**

- Rezultate rapide cu tratamente la 2 săptămâni
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient
- Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

#### **Soluție completă pentru față și corp**

- Soluție completă pentru față și corp cu 2 accesorii
- Este livrat cu un dispozitiv pentru retușuri Satin Compact
- Adecvat pentru o gamă largă de tonuri ale pielii și culori ale părului

#### **Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului**

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Îmbunătățește-ți rutina cu aplicația Philips Lumea IPL

# Lumea Seria 7000

Epilator IPL

## Repere

### De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide




Începe cu faza inițială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menține rezultatele.

### Senzor de nuanță a pielii



Alegeți din 5 setări de intensitate pentru o experiență confortabilă. Senzorul de nuanță a pielii vă împiedică să tratați zone ale pielii care sunt prea închise la culoare pentru tratamentul IPL.

### Cablu foarte lung

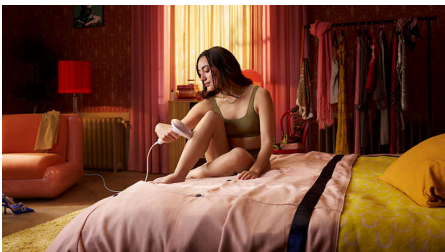


Ușor de utilizat grație unui cablu foarte lung pentru acces facil și manevrabilitate crescută.

### 2 accesorii dedicate




Capetele diferite pentru corp și față funcționează cu viteză și precizie pentru o utilizare delicată chiar și pe suprafețele sensibile. Accesoriul pentru față are un filtru ușor integrat pentru tratamentul de precizie.

### Dezvoltat împreună cu dermatologi

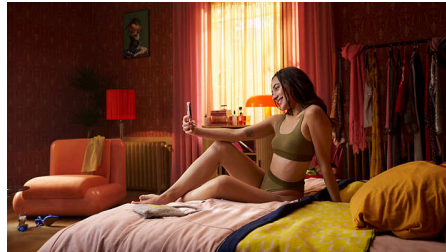

Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficientă în siguranța casei tale. Derivat din tehnologia utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

### Aplicația Philips Lumea IPL

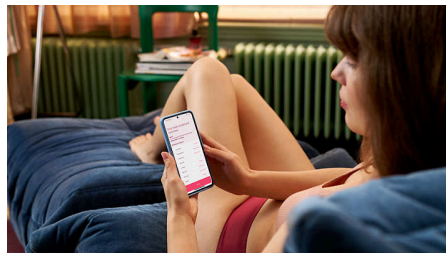

Aplicația noastră gratuită vă ajută să planificați tratamentul și să îl respectați, apoi vă ghidează pas cu pas prin fiecare sesiune. Descărcată de peste 2,1 milioane de utilizatori.

BRI921/00

### Dispozitiv de retușat Satin Compact



Completați-vă rutina de îngrijire: dispozitivul de retușat Satin Compact este un instrument discret de îngrijire pentru situațiile în care sunteți în grabă, pentru îndepărtarea rapidă și ușoară chiar și a celor mai fine fire de păr facial.

### Potrivit pentru multiple tipuri de piele și păr



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro mediu (I-IV).

## Specificații

### Specificații tehnice pentru accesorii

**Accesoriu pentru corp:** Dimensiunea ferestrei: 4,0x160;cm2, Tratament pentru corp: picioare, brațe, abdomen și axile

**Accesoriu pentru față:** Dimensiunea ferestrei: 2x160;cm2, filtru suplimentar, Tratament pentru față: buza superioară, barbă și maxilar

### Siguranță și setări reglabile

**Filtru UV integrat:** Îți protejează pielea de lumina UV

**5 setări pentru energia luminii:** Reglabil în funcție de tipul de piele

**Sistem de siguranță integrat:** Previne pulsarea neintenționată

### Mod de aplicare

**Slide și Flash:** Pentru aplicare rapidă

**Stamp și Flash:** Pentru tratarea suprafețelor mici

**Utilizare cu cablu / fără fir:** Utilizare cu fir

### Dispozitiv de rețușat

**Accesorii:** Pieptene pentru sprâncene, Perie de curățare

**Ușor de utilizat:** Mâner compact

**Alimentare:** Baterie AAA

### Putere

Utilizare cu cablu

### Specificații tehnice

**Lampă cu performanță ridicată:** Conceput pentru a dura, 250.000 pulsații, echivalentul a 20 de ani de durată de viață a lămpii\*\*

**Tensiune:** 100-240 V

### Atașamente

**Fixare corp (4cm2):** Pentru utilizare sub linia gâtului

**Atașamentul feței (2cm2):** Pentru utilizare în zona de sub ochi (perciuni, pomeți, obraji, bărbie, deasupra buzei superioare)

### Serviciu

**Garanție:** 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

### Articole incluse

**Instrucțiuni de folosire:** Manual de utilizare

**Depozitare:** Husă

**Adaptor:** 24 V/1500 mA

**Accesorii:** Lavetă de curățare

### Timp de aplicare

**Bikini:** 4 min

**Membrului inferior:** 15 min

**Zonele axilare:** 2,5 min

**Zona inghinală:** 4 min

**Zonele feței:** 2 min

