

# PHILIPS

IPL  
hårfjerningssystem

Lumea Essential

Kun til bruk på kroppen

15 minutter for å behandle  
leggene

Klinisk bevist resultat

120 dagers pengene-tilbake-  
garanti



SC1991/00



## IPL – Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker! for glatt hud hjemme

Philips Lumea IPL fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Test for 120 dager!

### Langvarig glatt hud

- Effektiv uten problemer
- Gled deg over glatt hud hver dag

### Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

### Skånsom og effektiv, selv på følsom hud

- For bruk på kroppen
- Kan tilpasses til hudtypen din
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Større kroppstilbehør for rask behandling

### Kompakt design med ledning

- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader

# Høydepunkter

## Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

## Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.


## IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle

skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

## Fem lysenergiinnstillinger

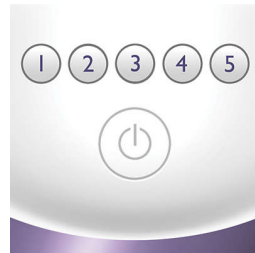

Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

## Bruksområder



Du kan trygt bruke den til å fjerne hår på områder nedenfor halsen: ben, armhuler, bikinilinje, armer og mage.

## Større kroppstilbehør, 4 cm<sup>2</sup>




Større kroppstilbehør gir rask behandling på store områder som bena.

## Trenger ikke ekstradeler



Philips Lumea er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geleer.

## Passende hår- og hudtyper

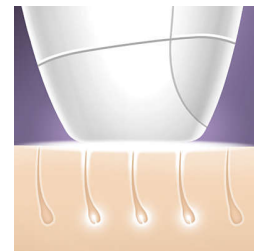

Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for mørk hud.

# Spesifikasjoner

## Bruksområder

**Kroppsområder:** Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

## Sikkerhet og justerbare innstillinger

**Integrert UV-filter:** Beskytter huden mot UV-stråler

**5 innstillinger for lysenergi:** Kan tilpasses til hudtypen din

**Integrert sikkerhetssystem:** Forhindrer utilsiktede lysglimt

## Programmodus

**Trinn og lysglimt:** For behandling på kurvede områder

**Bruk med kabel / trådløs bruk:** Med ledning

## Drift

**Spenning:** 100–240 V

## Tekniske spesifikasjoner

**Lampe med høy effekt:** Leverer <gt/> 100 000 lysglimt

## Tilbehør

**Kroppstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** For bruk nedenfor halsen

## Service

**Garanti:** 2 years global warranty

## Deler som medfølger

**Brukerhåndbok:** Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok

**Oppbevaring:** Veske

**Adapter:** 24 V -/ 1500 mA

## Påføringstid

**Legg:** 8 min

**Armhule:** 1 min

**Bikininlinje:** 1 min

