

PHILIPS



IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Mit SenseIQ Technologie
Präzisionsbereiche, Körper,
Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI954/00

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut* 3 intelligente Aufsätze – für optimale Ergebnisse

Philips Lumea Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere effektivste IPL. Die intelligenten Aufsätze von Lumea wurden für die bequeme Behandlung zu Hause entwickelt. Diese passen sich perfekt an jede Körperform an und spezielle Programme erkennen jeden Körperbereich.

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Mit SmartSkin Sensor
- Die Lumea IPL-App – begleitet Sie bei jedem Schritt
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie


- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt
- Mit Kabel oder kabellos verwenden
- Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- SenseIQ Technologie für individuelle Haarentfernung

Professionelle IPL-Behandlung für verschiedene Körperbereiche

- Intelligente Aufsätze passen Programme für jeden Körperbereich an
- Körperaufsatz mit geschwungenem Design
- Präzisionsaufsatz für das Gesicht mit zusätzlichem Filter
- Präzisionsaufsatz für Bikinizone und Achselhöhlen


Besonderheiten

Lumea verhindert Nachwachsen der Haare*

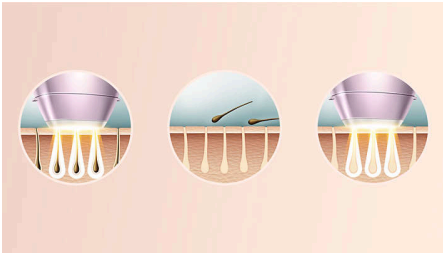


IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwachsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit

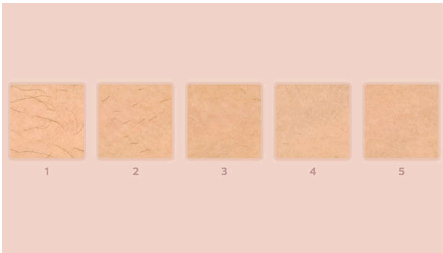


Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*

Geeignete Haar- und Hauttypen

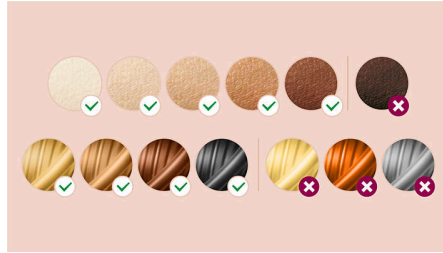

Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hutton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.

SenseIQ Technologie

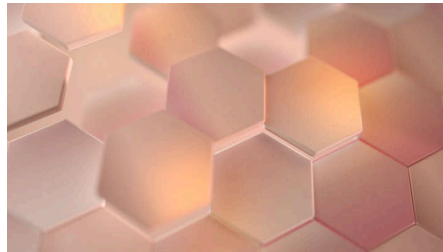

Wahrnehmen. Der SmartSkin Sensor von Lumea erkennt Ihren Hautton und zeigt die angenehmste Lichteinstellung für Sie an. Sich anpassen. Intelligente Aufsätze passen Programme an jeden Körperbereich an. Pflegen. Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und von Ihnen für eine sanfte, lang anhaltende Haarentfernung inspiriert, selbst an empfindlichen Stellen.***

Behandlung von Körperpartien

Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen Programme

anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

Präzisionsaufsatz

Der intelligente Präzisionsaufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster für eine präzise Abdeckung der Bikinizone und der Achselhöhlen. Das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Hautkontakt. Wenn der Aufsatz auf das Gerät aufgesetzt wird, startet er ein auf diese Körperbereiche zugeschnittenes Programm.

Körperaufsatz

Der intelligente Körperaufsatz verfügt über unser größtes Behandlungsfenster (4,1 cm²), weshalb er optimal für eine schnelle Behandlung an größeren Körperpartien wie den Beinen, Armen und dem Bauch geeignet ist. Das geschwungene Design schmiegt sich genau an die Körperkonturen für maximalen Hautkontakt an. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet dieser Aufsatz eine für diese Körperpartien maßgeschneiderte Behandlung. 83 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung an den Beinen.****

Aufsatz für das Gesicht

Der Aufsatz für das Gesicht wurde speziell mit einem kleinen, flachen 2 cm² großen Fenster ausgestattet, damit Sie Haare im Gesicht effizient und sanft behandeln können. Der Aufsatz eignet sich ideal für Oberlippe, Kinn oder Kieferpartie und verfügt außerdem über einen integrierten Zusatzfilter. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet der intelligente Aufsatz automatisch die Lichtbehandlung für Ihr Gesicht. 84 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung im Gesicht.****

SmartSkin Sensor

Philips Lumea Prestige mit SenseIQ Technologie verfügt über fünf einfach zu wählende Lichteinstellungen. Der SmartSkin Sensor erkennt Ihren Hautton und zeigt dann die angenehmste Lichteinstellung für den zu behandelnden Bereich an.

Lumea Prestige

IPL-Haarentfernungsgerät

Besonderheiten

Mit Kabel sowie kabellos verwendbar

Lumea Prestige ist das einzige kabellose IPL, sodass schwer erreichbare Körperpartien einfach behandelt werden können, ohne dass ein Kabel Ihre Reichweite oder Ihren Winkel beeinträchtigt. Dank der kabellosen Bedienung können Sie Ihr Körperhaar bequem von überall in Ihrem Zuhause aus behandeln.

Philips Lumea IPL-App

Mit der kostenlosen Lumea IPL-App ist es noch einfacher, bis zu sechs Monate lang glatte Haut zu erhalten – und das alles bequem von zu Hause aus. Die intuitive App hilft Ihnen bei jedem Schritt mit Tipps und Tricks zur Technik, während

die individuellen Behandlungsprogramme und die adaptive Planung Ihre idealen Behandlungszeitpunkte vorgeben. So sind Sie so schnell wie möglich immer bereit.

BRI954/00

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Keine Ersatzteile, kein Nachfüllen, keine Gels und nicht einmal eine Ersatzlampe sind erforderlich.

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Aufsatz zur Behandlung am Körper: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper

Aufsatz zur Behandlung im Gesicht: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Präzisionsbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, präzise, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen, Individuelle Behandlung für die Bikinizone

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Gesichtsbereiche: Kinn, Oberlippe, Kieferpartie

Empfindliche Bereiche: Achselhöhlen, Bikini

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungsmodus

Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung
Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und kabellos verwendbar

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

High Performance-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse*****

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung

Aufbewahrung: Hochwertige

Aufbewahrungstasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Achselhöhle: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.

