

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Prestige

Com tecnologia SenseIQ

Áreas de precisão, corpo, rosto

Com sensor SmartSkin

Utilização com e sem fios



BRI954/00



Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 6 meses*

3 acessórios inteligentes para resultados perfeitos

O Philips Lumea Prestige com tecnologia SenseIQ é o nosso sistema de IPL mais eficaz. Concebido para uma utilização cómoda em casa, os acessórios inteligentes do Lumea adequam-se na perfeição a todas as curvas do seu corpo e adaptam programas específicos para cada zona do corpo.

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Com sensor SmartSkin
- Aplicação Lumea IPL. Consigo em todas as etapas
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos

Pele macia e de longa duração com tecnologia de luz pulsada Lumea


- Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas
- Utilizar com ou sem fios
- Tratamento suave e eficaz comprovado
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele
- Tecnologia SenseIQ para remoção de pelos personalizada

Tratamento de IPL profissional para áreas específicas do corpo

- Acessórios inteligentes que adaptam os programas a cada zona do corpo
- Acessório corporal com design curvo
- Acessório de precisão para rosto com filtro adicional
- Acessório de precisão para linha do biquíni e axilas


Destaque

A Lumea evita o crescimento do pelo*

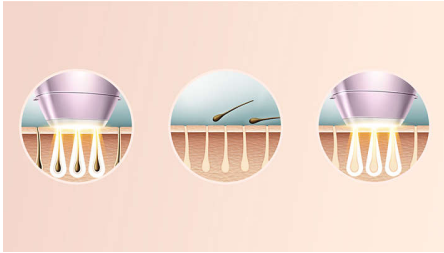


IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.

Eficácia comprovada

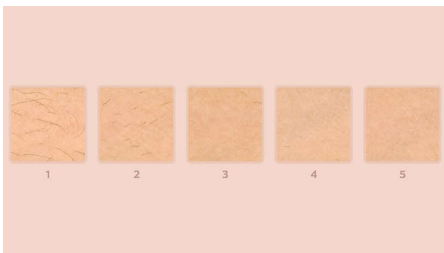


Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos**. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12 tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.

Tipos de pelo e pele adequados

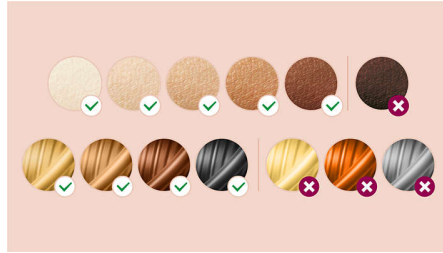

O Philips Lumea Prestige é eficaz numa grande variedade de tipos de pelo e tons de pele. Funciona em pelo louro escuro natural, castanho, e preto e em tons de pele desde muito claro a castanho escuro. Os tratamentos IPL necessitam de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso (tais como outros tratamentos de IPL) o Lumea não pode ser utilizado para tratar pelo branco, grisalho, louro claro ou ruivo e não se adequa a pele morena escura.

Tecnologia SenseIQ

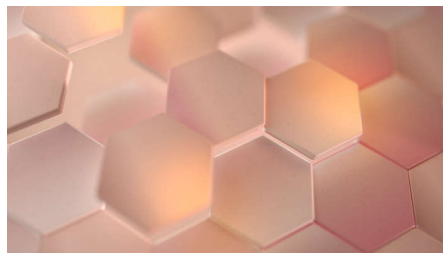

Deteta. O sensor SmartSkin do sistema Lumea deteta o seu tom de pele e indica qual definição de luz é mais confortável para si. Adapta. O acessório inteligente adapta programas personalizados para cada zona do corpo. Cuida. Desenvolvido em colaboração com dermatologistas e inspirado em si para remoção de pelos suave e de longa duração, mesmo em áreas sensíveis***.

Tratamento de zonas corporais



O seu corpo é único. E a sua pele, curvas e contornos devem ser tratados como tal. Os acessórios para todo o corpo Lumea

adequam-se na perfeição a todas as curvas do seu corpo e adaptam programas específicos para cada zona do corpo. As janelas de tratamento foram concebidas para maximizar o contacto com a pele e para garantir que a luz é bem direcionada, assegurando tratamentos eficazes e suaves, mesmo em zonas delicadas ou sensíveis.

Acessório de precisão



O acessório inteligente de precisão é de tamanho médio, com janela de 3 cm², para uma cobertura precisa das áreas das axilas e linha do biquini. O design curvo segue os contornos do corpo para um contacto máximo com a pele. Quando o acessório é encaixado no dispositivo, adapta um programa personalizado a estas zonas do corpo.

Acessório corporal



O acessório corporal inteligente tem a nossa maior janela de tratamento, com 4,1 cm², por isso é perfeito para um tratamento rápido em áreas do corpo maiores como pernas, braços e abdómen. O design curvo segue os contornos do seu corpo para um contacto máximo com a pele. Encaixe o acessório e este adapta um programa personalizado especificamente para a zona do seu corpo. 83% das mulheres estão satisfeitas com a redução de pelos nas pernas****.

Especificações

Anexos de especificações técnicas

Acessório para tratamento corporal: Formato: curvo convexo, Tamanho da janela: 4,1 cm², Tratamento adaptado para corpo

Acessório para tratamento facial: Formato: plano, Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Tratamento adaptado para rosto

Acessório para tratamento de precisão: Formato: curvo côncavo, preciso, Tamanho da janela: 3 cm², Tratamento adaptado para axilas, Tratamento adaptado para linha de biquíni

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga

Zonas do rosto: Queixo, Buço, Maxilar

Zonas sensíveis: Axilas, Biquíni

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Deteta o seu tom de pele

Sensor SmartSkin: A regulação correta sempre que desejar

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida

Utilização com/sem fios: Utilização com e sem fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas pequenas

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 250 000 impulsos de luz*****

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa de luxo

Adaptador: 19,5 V / 4000 mA

Tempo de aplicação

Axila: 2,5 min

Linha do biquíni: 2 min

Zonas do rosto: 1,5 min

Parte inferior das pernas: 8,5 min

