

PHILIPS

Dispositivo di
epilazione IPL

Lumea IPL 7000
Series

5 impostazioni manuali di
intensità

2 accessori: corpo, viso

App Lumea IPL

Utilizzo con cavo

BRI922/00



Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

Pelle liscia e priva di peli con il nostro Lumea IPL serie 7000. I trattamenti sono delicati ed efficaci con accessori per ogni zona del corpo.

Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo

- Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi
- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace
- Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Soluzione completa per viso e corpo

- Soluzione completa per viso e corpo con 2 accessori
- Sistema di pulizia viso VisaPure mini in dotazione
- Adatto per un'ampia gamma di tipi di pelle e colore dei peli

Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato

- Sensore della tonalità della pelle e 5 impostazioni di intensità
- Ottimizza la tua routine con l'app Philips Lumea IPL

In evidenza

2 trattamenti al mese per risultati rapidi



Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 15 minuti.

Sensore della tonalità della pelle




Scegli tra 5 impostazioni di intensità per un'esperienza confortevole. Il sensore di rilevamento della tonalità della pelle evita di trattare zone troppo scure per il trattamento a luce pulsata.

Cavo extra-lungo




Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

2 accessori dedicati

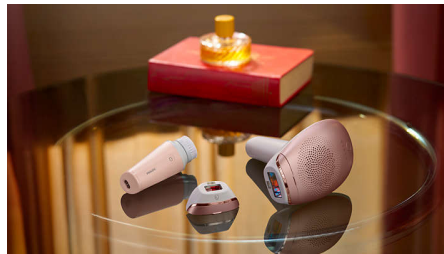

Accessori specifici per il corpo e il viso per un trattamento veloce e preciso ed un utilizzo delicato anche sulle zone sensibili. L'accessorio per il viso è dotato di un filtro luce integrato per un trattamento preciso.


Sviluppato in collaborazione con dermatologi

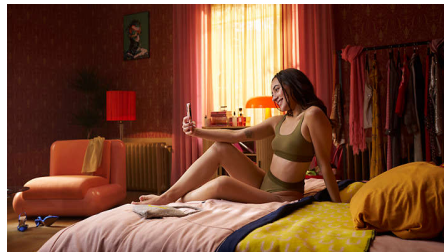

In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu

possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

App Philips Lumea IPL

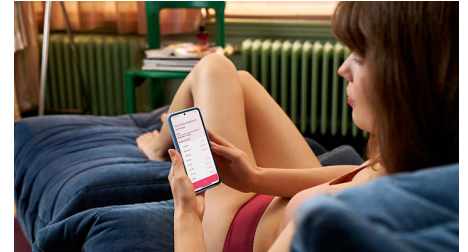

La nostra app per il coaching gratuita ti aiuta a pianificare e rispettare il tuo programma di trattamento, guidandoti passo dopo passo in ogni sessione. Scaricata da oltre 2,1 milioni di utenti.

Sistema di pulizia viso VisaPure mini

Completa la tua routine di bellezza: il sistema di pulizia per il viso VisaPure mini è un dispositivo compatto per una pulizia del viso semplice ma che rende la pelle visibilmente morbida e fresca.

Per molti tipi di pelle e di peli



La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il colore del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro, oppure su quelli castani o neri e su pelle da molto chiara a marrone (I- IV).

Specifiche

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per un'applicazione rapida

Con filo/cordless: Utilizzo con cavo

Pressione e flash: Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

Assorbimento

Utilizzo con cavo

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Progettato per durare, eroga 250.000 flash, equivalenti a 20 anni di trattamenti con lampada**

Voltaggio: 100-240 V

Accessori

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Accessorio per il viso (2 cm²): Per l'uso al di sotto degli occhi

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Manuale utente

A magazzino: Custodia Beauty

Adattatore: 24 V / 1500 mA

Accessorio: Panno per la pulizia

Tempo di applicazione

Zona bikini: 4 minuti

Parte inferiore della gamba: 15 minuti

Ascelle: 2,5 min

Zona bikini: 4 min

Zone del viso: 2 minuti

Sistema di pulizia viso VisaPure mini

Zone di applicazione: Viso e collo

Facilità d'uso: Senza filo, Impermeabile, 1 impostazione di velocità

Accessori inclusi: Spazzola per pelli normali, Alimentatore

Accessori: Spazzola per pelli normali, Alimentatore

Assorbimento: Alimentatore

Specifiche tecniche accessori

Accessorio per il corpo: Dimensione finestra: 4,0 cm², Trattamento per il corpo: gambe, braccia, addome e ascelle

Accessorio viso: Dimensione finestra: 2 cm², filtro aggiuntivo, Trattamento per il viso: labbro superiore, mento e mascella

