

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met SenseIQ-technologie

Lichaam en gezicht

Met SmartSkin-sensor



BRI950/00



Geniet zes maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Twee intelligente hulpstukken voor optimale resultaten

Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Met SmartSkin-sensor
- De Lumea IPL-app. Voor alle te volgen stappen
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie


- Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen
- Gebruik draadloos of met snoer
- Bewezen zacht en effectief
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- SenseIQ-technologie voor een persoonlijke ontharing

Professionele IPL-behandeling voor verschillende lichaamsdelen

- Slimme opzetstukken stemmen de behandeling af op elk lichaamsdeel
- Lichaamsopzetstuk met naar binnen gebogen ontwerp
- Nauwkeurig opzetstuk voor het gezicht met extra filter


Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes*

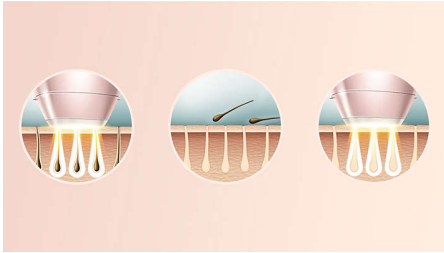


IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel en stimuleert het haartzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen effectiviteit

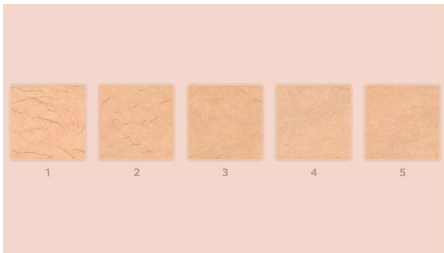

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.


Geschikte haar- en huidtypen

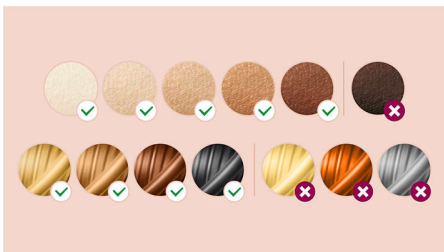

Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en

zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

SenseIQ-technologie

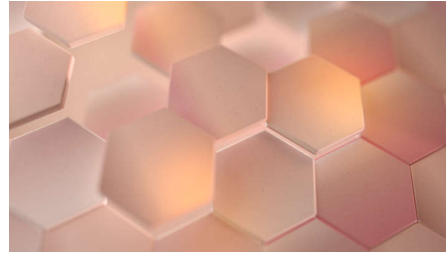

Zintuigen. De SmartSkin-sensor van Lumea detecteert uw huidskleur en bepaalt de meest comfortabele lichtinstelling voor u. Past zich aan. Intelligente opzetstukken zorgen voor een op maat gemaakt behandlungsprogramma dat is afgestemd op ieder deel van uw lichaam. Verzorgt. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en geïnspireerd door u voor een zachte, langdurige ontharing, zelfs op gevoelige plekken***.

Behandeling van lichaamsdelen



Uw lichaam is uniek en uw huid, rondingen en contouren verdienen daarom ook een unieke behandeling. De opzetstukken van Lumea voor het volledige lichaam passen perfect in alle rondingen en hebben voor ieder lichaamsdeel een op maat gemaakt programma. Behandelingsvensters zijn ontworpen om het contact met uw huid te maximaliseren, zodat het licht niet kan ontsnappen en effectieve en zachte behandelingen mogelijk zijn, zelfs op tere of gevoelige gebieden.

Lichaamsopzetstuk



Het slimme lichaamsopzetstuk heeft met 4,1 cm² het grootste behandelvenster en is dus ideaal voor een snelle behandeling van grote lichaamsdelen, zoals benen, armen en buik. Het naar binnen gebogen ontwerp volgt de contouren van het lichaam voor optimaal huidcontact. Wanneer dit opzetstuk op het apparaat wordt geplaatst, wordt automatisch een behandeling geactiveerd die geschikt is voor deze lichaamsdelen. 83% van de vrouwen is tevreden met de haarvermindering op de benen****.

Hulpstuk voor het gezicht



Het opzetstuk voor het gezicht is zorgvuldig ontworpen voor een klein, plat venster van 2 cm² zodat u het haar op uw gezicht effectief en voorzichtig kunt behandelen. Ideaal voor de bovenlip, kin of kaaklijn. Ook heeft het opzetstuk een extra geïntegreerde filter en bij plaatsing op het apparaat wordt de lichtbehandeling voor uw gezicht automatisch aangepast. 84% van de vrouwen was tevreden met afname van de hoeveelheid haar op haar gezicht****.

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Venstergrootte: 4,1 cm²,
Vorm: bol gebogen, Afgestemde
lichaamsbehandeling

Opzetstuk voor het gezicht: Venstergrootte: 2
cm², extra filter, Vorm: plat, Afgestemde
behandeling voor het gezicht

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Geeft
>250.000 flitsen af****

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik

Gevoelige gebieden: Oksels, Bikini

Delen van het gezicht: Kin, Bovenlip, Kaaklijn

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt
dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Behandeltijd

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.

Application time

Oksel: 2,5 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met
als zonder snoer te gebruiken

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine
zones

