

PHILIPS

IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 7000
Series

5 handmatige
intensiteitsinstellingen

2 opzetstukken: lichaam, gezicht

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer

BRI922/00



Geweldige resultaten en waar voor uw geld

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor het lichaam en gezicht.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht met 2 slimme opzetstukken
- Geleverd met VisaPure-minigezichtsreiniger
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Kenmerken

2x per maand voor snelle resultaten




Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 15 minuten.

Skin Tone-sensor




Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel

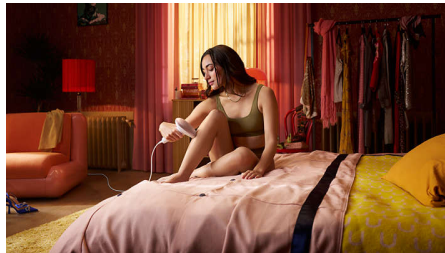


Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

2 speciale opzetstukken

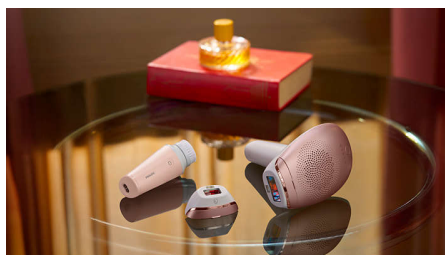

Verschillende koppen voor lichaam en gezicht werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.


Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

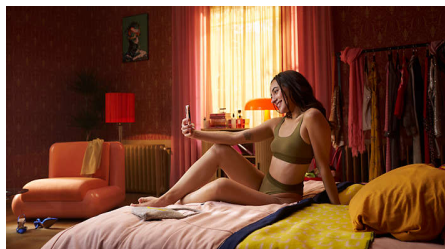

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen,

voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app

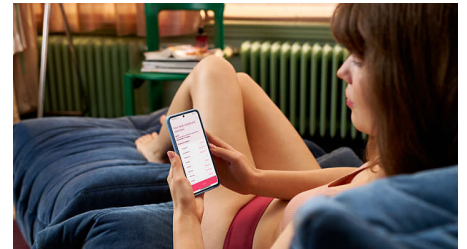

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

VisaPure-minigezichtsreiniger

Voltooi uw schoonheidsroutine: De VisaPure-minigezichtsreiniger is een compact en zeer handig reinigingsapparaat voor een zichtbaar frisse en zachte huid.

Voor veel huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I- IV).

Specificaties

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermde uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Vermogen

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar**

Spanning: 100-240 V

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Gezichtsopzetstuk (2 cm²): Voor gebruik onder de ogen

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeliverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Onderbenen: 15 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 4 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

VisaPure-minigezichtsreiniger

Toepassingsgebieden: Gezicht en hals

Gebruiksgemak: Draadloos, Waterdicht, 1 snelheidsstand

Meegeliverde artikelen: Opzetborstel voor de normale huid, Stroomadapter

Accessoires: Opzetborstel voor de normale huid, Stroomadapter

Vermogen: Stroomadapter

Technische specificaties hulpstukken

Hulpstuk voor lichaam: Venstergrootte: 4,0 cm², Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

Hulpstuk voor het gezicht: Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

