

PHILIPS

Masque naso-
buccal

DreamWear

Pack

avec coussin naso-buccal de
taille M

et deux conduits de taille S et
M



HH1126



Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du DreamWear naso-buccal

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque incluent des aimants pour un maintien optimal.

Champ de vision dégagé

- Conception offrant un champ de vision dégagé

Conception innovante

- Liberté de mouvement
- Une conception modulaire pour plus de possibilités

Confort et facilité d'utilisation

- Facile à utiliser
- Conduit souple et doux
- Coussin naso-buccal positionné sous le nez

Points forts

Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque naso-buccal DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit*.

Aucune marque rouge sur l'arête nasale




Le coussin innovant positionné sous le nez permet d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale**.

Vision dégagée



Avoir le champ de vision dégagé vous permet de porter vos lunettes, lire, regarder la télévision et d'utiliser un ordinateur ou une tablette en toute simplicité, avant de vous endormir**.

Pour oublier que vous portez un masque

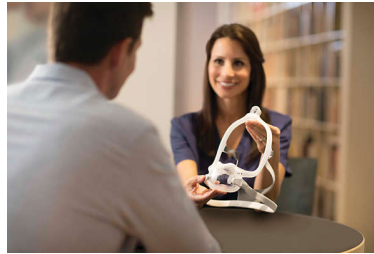

Le conduit souple et doux assure un confort optimal pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oubliaient la présence du masque*.

Liberté de choix



La conception modulaire permet aux utilisateurs de choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en conservant un conduit unique.

Facile à utiliser



Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, le démontage et le nettoyage.

Clips magnétiques



Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

Caractéristiques

Avertissement : interférences magnétiques

Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Read IFU's before use.

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <math>< 30\text{ kg}</math>: with CPAP prescription

Informations sur le produit

Materials: Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex
Warranty: 90 days

Pression de fonctionnement: 4 to 30 cmH2O

Niveau sonore: 17 dBA

Nombre de pièces: 5

Nettoyage : harnais, circuit

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Nettoyage : masque

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, air dry¹

Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:

Replace at first sign of wear

- * * Analyse des données – août 2017 – Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus (10 jours d'utilisation).
- * ** Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne pas toucher l'arête nasale.
- * ¹Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.
- * En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.
- * Avertissement : certains dispositifs médicaux risquent d'être affectés par les champs magnétiques. Il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 50 mm entre les fixations magnétiques de ce masque et tout dispositif médical actif, en portant une attention particulière aux dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Ne pas utiliser ce dispositif dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à proximité d'un tel équipement.
- * DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

