

PHILIPS

SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

Lumea IPL Prestige

SmartSkin Sensörü

2 akıllı başlık: vücut, yüz

Lumea IPL Uygulaması

Kablosuz ve kablolu kullanım

BRI950/00



SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama 12 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

En hızlı Lumea IPL cihazımızın kablosuz modeliyle zahmetsiz, kişiye özel uygulama deneyiminin keyfini çıkarın. Akıllı başlıklara sahip SenseIQ teknolojisi ve Lumea IPL uygulamasında sunulan rehberlik sayesinde, cildiniz uzun süre pürüzsüz bir görünüme sahip olur.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazik ve etkili uygulama

- Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez bakım yapın
- Nazik ve etkili uygulama
- Kablosuz kullanım seçeneğine sahip tek Lumea

Yüz ve vücut için eksiksiz çözüm

- Yüz ve vücut için 2 akıllı başlıklı, eksiksiz çözüm
- Çoğu cilt tonu ve tüy rengi için uygundur

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım
- Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

Özellikler

2 akıllı başlık




Vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel şekilde uyum sağlayan, özel olarak tasarlanmış uygulama başlıkları takıldığında her vücut bölgesi için en etkili programları tetikler. Yüz: Düz tasarım ve UV filtreli küçük pencere. Vücut: İçe doğru kıvrımlı tasarım ve geniş pencere.

Philips Lumea IPL uygulaması




Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Dermatologlarla geliştirildi

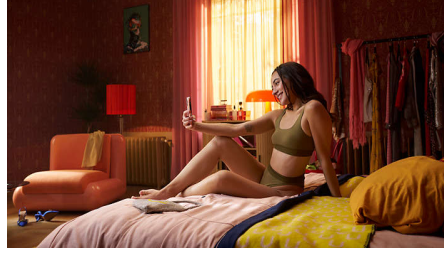

Sağlık teknolojisinde lider olan Philips, uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirdi.

Hızlı sonuçlar için ayda 2 uygulama

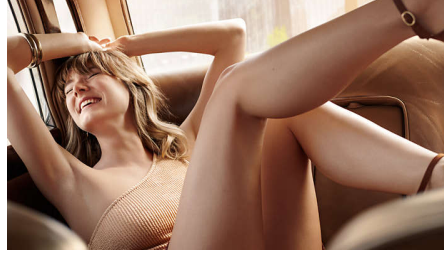

Başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.

SenseIQ teknolojisi



Lumea Prestige, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Dilerseniz kablosuz kullanım



Lumea Prestige, daha fazla rahatlık için kablosuz kullanım özelliğine sahip tek IPL cihazımızdır. Bu sayede her yere hassas bir şekilde erişilebilir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Çoğu cilt ve tüy tipi için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila koyu kahverengi cilt tonlarında etkilidir (I-V).

Teknik Özellikler

Aparat teknik özellikleri

Body treatment attachment: Şekil: Dışbükey
kırımlı, Pencere boyutu: 4,1 cm², Vücuda özel
uygulama: bacaklar, kollar ve karın

Face treatment attachment: Şekil: Düz,
Pencere boyutu: 2 cm², ekstra filtre, Yüze özel
uygulama: dudak üstü, çene ve çene hattı

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı
korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre
ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları
önler

SmartSkin sensor: İsteğe uygun ayarlama

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Hızlı uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz ve
kablolu kullanım

Damga ve Flaş: Küçük bölgelerde uygulama
için

Teknik özellikler

Pil tipi: Şarj edilebilir pil

Gerilim: 100-240 volt

High performance lamp: Uzun ömürlü,
250.000 ışık atışı, 20 yıllık lamba ömrüne
eşdeğerdir***

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması
halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek
garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Lüks kılıfı

Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Uygulama süresi

Koltuk altları: 2,5 dk

Bikini line: 2 dk

Yüz alanları: 1,5 dk

Lower legs: 8,5 dk

