

PHILIPS

Precision Plus Corps
Visage et Maillot

Lumea

Pour le corps, le visage et le maillot

15 minutes pour les demi-jambes

Durée de vie <gt/> 140 000 flashes

Utilisation sans fil



SC2008/12



Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils pour avoir la peau lisse chez soi

Très efficace, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le visage (lèvres supérieures, menton et pattes), le corps et le maillot. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Douceur longue durée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

Doux et efficace sur le corps, le visage et la zone du maillot


- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grand accessoire corps pour un flashage rapide
- Accessoire visage pour une épilation sûre du visage
- Accessoire spécial pour l'épilation de la zone du maillot
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

Points forts

Douceur longue durée

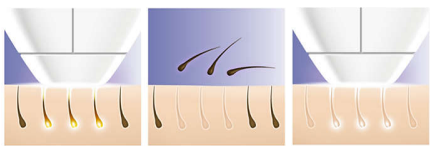

Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a

travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.

Types de peaux et de poils adaptés

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes

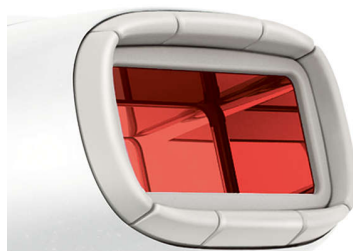

Grand accessoire pour flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage



L'accessoire visage a son propre verre filtrant intégré pour une utilisation sûre et pratique sur la lèvre supérieure, le menton et les joues. Il peut également être utilisé sur les autres zones sensibles du corps comme les aisselles et les autres zones difficiles d'accès.

Accessoire maillot



Accessoire spécial maillot pour un traitement efficace de la zone du maillot, dont les poils sont généralement plus épais que ceux des jambes.

Cinq niveaux d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour une application pratique

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

Alimentation

Tension: 100-240 V

Temps de charge: 100 min

Autonomie: 370 flashes minimum

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 140 000 flashes

Accessoires

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoire maillot (2 cm²): Pour une utilisation

sur la zone du maillot

Accessoire visage (2 cm²): Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Zones du visage: 1 min

