

# PHILIPS

Dispositivo de  
depilación IPL

Lumea Advanced

Solución completa para el  
cuerpo

15 minutos para medias piernas

Cómodo cable extralargo



SC1993/04



## Reducción cuidadosa del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced es estupendo para evitar la reaparición del vello corporal. Cuando se aplica de forma regular, los suaves pulsos de luz mantienen la piel suave como la seda cada día. Y además, la afeitadora eléctrica en seco y húmedo te prepara para el tratamiento con IPL.

### Seguro, rápido y eficaz en el cuerpo

- Para el uso en el cuerpo
- Gran ventana para una aplicación rápida
- Tratamiento suave

### Máxima libertad, mínimas molestias


- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables

### Piel suave por más tiempo con la tecnología IPL de Lumea

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel
- Con afeitadora eléctrica en seco y húmedo


# Destacados

## Disfruta de una piel suave a diario

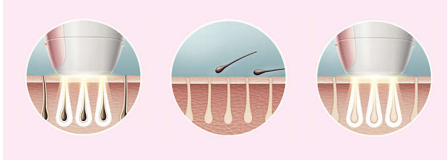

Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

## Eficacia sin esfuerzo

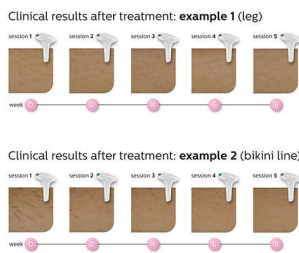

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

## Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de


belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

## Vello y tipos de piel adecuados




Philips Lumea Prestige funciona de forma eficaz, fácil y segura en una amplia variedad de tipos de vello y de piel. Funciona en vellos rubios oscuros, castaños y negros (de color natural) y en tonos de piel que van desde el muy blanco al marrón oscuro. Al igual que ocurre con otros tratamientos basados en IPL, Philips Lumea no se puede utilizar para tratar vello blanco/gris, rubio claro o pelirrojo y no es adecuado para la piel muy oscura. Esto se debe al alto contraste necesario entre la pigmentación del color del vello y el pigmento del tono de la piel.

## Zonas de aplicación

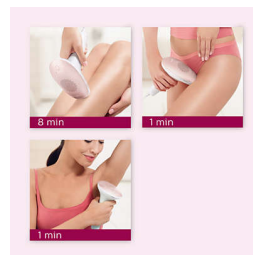

Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo por debajo del cuello: piernas, axilas, línea del bikini, brazos y línea alba.

## Accesorio para el cuerpo

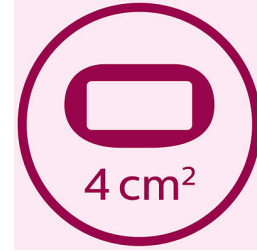

El accesorio corporal grande permite un tratamiento más rápido de zonas grandes como las piernas.

## Tratamiento suave



Suave con tu piel.

## No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. No son necesarios cartuchos ni geles de repuesto.

# Especificaciones

## Potencia

Tensión: 100-240 V

## Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250 000 pulsos

## Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Abdomen, Axilas, Bikini

## Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

## Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual de usuario completo

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V/1500 mA

Accesorio: Paño de limpieza

## Items included

Extra: Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

## Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

## Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 1 minuto

## Modo de aplicación

Uso con/sin cable: Con cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

