

PHILIPS

IPL para eliminar vello: ed. regalo

Lumea Essential

Solo para uso en el cuerpo

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 100 000 pulsos de luz

Cable extra largo

 Product Picture

SC1991/04



Inhibición del crecimiento del vello

Para una piel suave día tras día

El sistema Philips Lumea IPL hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días. La edición de regalo incluye una afeitadora femenina para la preparación al tratamiento IPL.

Fácil de usar

- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Prepárate para el tratamiento IPL con una afeitadora adicional.

Suavidad duradera

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Seguro, rápido y eficaz en el cuerpo

- Accesorio para el cuerpo: tratamiento rápido (15 min 2 medias piernas)
- Se adapta a tu tipo de piel
- Para el uso en el cuerpo
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables

Destacados

Disfruta de una piel suave a diario



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y

con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Gran accesorio para el cuerpo, 4 cm²



El accesorio corporal grande permite un tratamiento más rápido de zonas grandes como las piernas.

Vello y tipos de piel adecuados

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pelo e pele adequados		Tono de piel / Tom de pele					
		1	2	3	4	5	6
Categoría de vello / Categoria de cabelo	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Puedes utilizar este producto. Este producto é adequado para si.
 Este producto no es seguro ni adecuado para tu tono de piel y tipo de vello. Este produto não é adequado nem seguro para o teu tom de pele e a cor do teu cabelo.


Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo por debajo del cuello: piernas, axilas, línea del bikini, brazos y línea alba.

Cinco posiciones de energía de luz

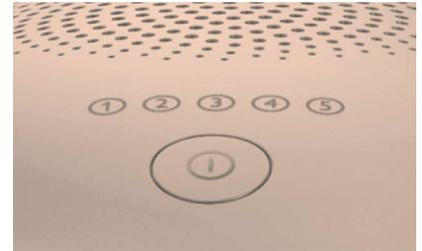

Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Artículo de regalo: afeitadora femenina



Prepárate para el tratamiento IPL con una afeitadora adicional. Con la afeitadora femenina compacta de Philips puedes afeitarte todo el cuerpo de manera rápida y sencilla. Puedes utilizarla en la ducha o en seco, como prefieras. Es compacta y funciona con batería.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100-240 V

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona
<gt/> 100 000 pulsos

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido,

Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V/1500 mA

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 1 minuto

Application mode

Paso y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Modo de aplicación

Uso con/sin cable: Con cable

