

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Advanced

Solução completa para o corpo


15 minutos para tratar meia perna

Prático cabo extra longo




Destaques

Tenha uma pele suave todos os dias

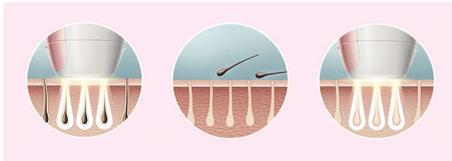

O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço

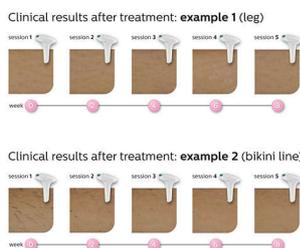

Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada

em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Tipos de pêlo e pele adequados




O Philips Lumea Prestige funciona de forma eficiente, simples e segura numa grande variedade de tipos de pêlo e pele. É adequado a pêlos louros escuros, castanhos e preto naturais e a tons de pele desde muito branco a castanho escuro. Tal como os outros tratamentos à base de luz pulsada intensa, o Philips Lumea não é eficaz a tratar pêlos brancos/grisalhos, louros claros ou ruivos e não é adequado a tons de pele muito escuros. Isto deve-se ao alto contraste que é necessário entre o pigmento na cor do pêlo e o pigmento no tom de pele.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos nas zonas corporais abaixo do pescoço: pernas, axilas, linha do biquíni, braços e barriga.

Acessório corporal

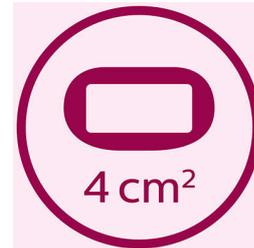

O acessório corporal grande permite um tratamento rápido de áreas maiores, como as pernas.

Tratamento delicado



Suave para a sua pele.

Não necessita de peças de substituição



O Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Não é necessário encher recargas nem géis.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 250 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Axilas, Biquíni

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador completo

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

Items included

Oferta: Depiladora de corte eléctrica a húmido e a seco

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao

seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axilas: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Modo de aplicação

Utilização com/sem fios: Com fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

