

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea Precision

Para uso no corpo e no rosto

15 minutos para pernas

Vida útil >100.000 flashes
de luz

Design sem fio



SC2002/01



Evite o crescimento de pelos

Remoção de pelos IPL: sua pele macia todos os dias

O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os pulsos de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.

Maciez todos os dias

- Sua pele macia todos os dias
- Eficiência sem esforço

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa
- Tipos de pele e pelo adequados

Aplicação suave e com alto desempenho no rosto e no corpo


- Áreas de aplicação
- Mesmo em peles ou partes do corpo mais sensíveis
- Especialmente desenvolvido p/ proteção extra do rosto

Total liberdade, sem complicação

- Uso sem fio: mais praticidade
- Sem peças de substituição.

Destaques

Maciez todos os dias

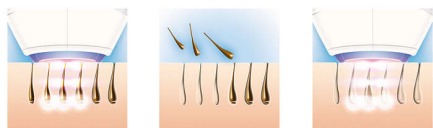

O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de dois tratamentos quinzenais e uma redução total dos pelos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter esses resultados, repita o tratamento a cada quatro ou seis semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar.

Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora de remoção de pelos a laser chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo

sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 1.500 voluntários.

Aplicação suave e segura



A Philips Lumea tem cinco configurações ajustáveis de luz para um tratamento suave e eficiente. Usado de forma correta, o tratamento IPL Philips Lumea é seguro e suave, mesmo em regiões sensíveis da pele e do corpo. A frequência de recarga da bateria e a duração do tratamento dependem da configuração de energia selecionada e da região de aplicação.

Uso sem fio: mais praticidade



O design sem fio exclusivo do Philips Lumea é perfeito para o tratamento de qualquer área desejada.

Sem peças de substituição.




O Philips Lumea é uma solução completa que vem pronta para uso. E o mais importante: ele não requer gel ou lâmpadas de substituição.

Áreas de aplicação

Use com total confiança p/ a remoção de pelos do rosto (buço, cavanhaque e costeletas) e regiões do corpo, incluindo axilas, área do biquíni, estômago e braços.

Desenvolvido p/ o rosto e corpo

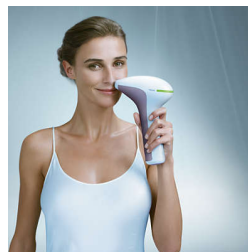

O bocal de precisão é especialmente desenvolvido para aplicação no rosto. Ele inclui um filtro de luz extra integrado que oferece mais proteção para o rosto. A área de aplicação menor é ideal para o buço e para as regiões difíceis de alcançar.

Tipos de pele e pelo adequados



O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos louro-escuros (naturais), castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a laser, o Philips Lumea NÃO funciona corretamente com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Virilha, Axilas
Áreas da face: Queixo, Costeletas, Buço

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV
5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele
Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais

Modo de aplicação

Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas
Uso com fio / sem fio: Sem fio

Alimentação elétrica

Tempo de carregamento: 100 min
Voltagem: 100-240 V
Tempo de funcionamento: 320 flashes por minuto

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 80.000 flashes

Acessórios

Acessório do aparelho (3 cm2): Para uso abaixo da linha do pescoço
Aparador de precisão (2 cm2): Para aplicação segura no rosto

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: DVD demonstrativo, Guia de início rápido, Manual do Usuário
Carregador: Carregador bivolt
Armazenamento: Estojo

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min
Axila: 1 min
Linha do biquíni: 1 min
Áreas da face: 1 min

