

# PHILIPS

IPL-  
Haarentfernungsgerät

Lumea Advanced

Komplettlösung für den Körper

15 Minuten für beide  
Unterschenkel

Praktisches, extra langes Kabel

Gratis: Nass- und  
Trockenrasierer



SC1993/04



## Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Advanced vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Körperbehaarung vorzubeugen. Bei regelmäßiger Anwendung sorgen sanfte Lichtimpulse für eine seidig glatte Haut an jedem Tag. Gratis: Nass- und Trockenelektorasierer, der Sie auf die IPL-Behandlungen vorbereitet.

### **Sicher, schnell und effektiv auf dem Körper**

- Zur Anwendung am Körper
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Sanfte Behandlung

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**


- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

### **Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie**

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- Elektrischer Nass- und Trockenrasierer im Lieferumfang enthalten

# Besonderheiten

## Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

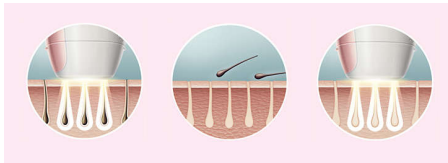

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

## Einfach wirksam

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

## IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir


haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea Prestige kann bei vielen Haar- und Hauttypen verwendet werden. Geeignet für (von Natur aus) dunkelblonde, braune und schwarze Haare und für Hauttöne von sehr weiß bis dunkelbraun. Aufgrund des erforderlichen hohen Kontrasts zwischen Haar- und Hautpigmenten ist Philips Lumea, wie andere lichtbasierte Behandlungsmethoden auch, weder für die Behandlung von weißen/grauen, hellblonden oder roten Haaren noch für die Behandlung von sehr dunkler Haut geeignet.

## Anwendungsbereiche

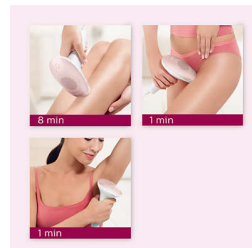

Körperhaare an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

## Körperaufsatz



Großer Körperaufsatz ermöglicht schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

## Sanfte Behandlung



Sanft zu Ihrer Haut.

## Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Keine Nachfüll-Kartuschen oder Gels erforderlich.

## Sonder-Edition



Erleben Sie eine gründliche, aber gleichzeitig sanfte Rasur Ihrer Beine und Ihres Körpers. Der SatinShave Advanced Rasierer sorgt für glatte Haut – und das sogar unter der Dusche oder in der Badewanne. Erzielen Sie einfach und bequem glatte Haut ohne Hautirritationen.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Arme, Beine, Bauch, Achselhöhlen, Bikini

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

## Anwendungsmodus

**Mit Kabel/kabellos:** Mit Kabel  
**„Stamp and Flash“:** Für die Behandlung kurviger Bereiche

## Leistung

**Stromspannung:** 100-240 V

## Technische Daten

**Hochleistungs-Lampe:** Bietet <gt/> 250.000 Lichtimpulse

## Aufsätze

**Körperaufsatz (4 cm<sup>2</sup>):** Für den Gebrauch unterhalb des Halses

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Garantie

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Vollständige Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Aufbewahrungsetui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

**Zubehör:** Reinigungstuch

**Gratis:** Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8 Min.

**Unterarme:** 1 Min.

**Bikinizone:** 1 Min.

