

PHILIPS

IPL epilátor pro
odstraňování chloupků

Lumea Series 9000

Senzor SmartSkin

4 inteligentní nastavce: tělo,
obličej, bikiny, podpaží

Aplikace Lumea IPL

Použití s kabelem i bez něj



BRI958/00



Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

s naší nejrychlejší a nejefektivnější IPL

Naše nejúčinnější IPL – až 6 měsíců hladká pokožka po úplném dokončení cyklu ošetření**. Technologie IPL s funkcí SenseIQ na odstraňování chloupků s dlouhodobým efektem, pro všechny partie těla, v pohodlí domova. Užívejte si hladkou pokožku jako z kosmetického salónu díky osobnímu poradenství prostřednictvím aplikace Philips Lumea IPL.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 4 chytrými nastavci
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ
- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky




Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Technologie SenseIQ



Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nastavení přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Funguje i bezdrátově

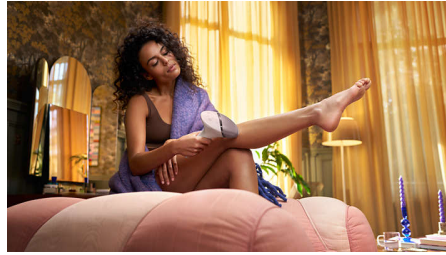

Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.

4 chytré nastavení




Speciálně navržené nastavení jsou dokonale přizpůsobeny křivkám vašeho těla a po připojení spustí ten nejefektivnější program pro každou oblast. Obličej: Plochý design a malé okénko s UV filtrem. Tělo: Zakřivený směrem dovnitř s velkým okénkem. Třísla a podpaží: Zakřivený směrem ven pro obtížně dostupné oblasti.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Aplikace Philips Lumea IPL

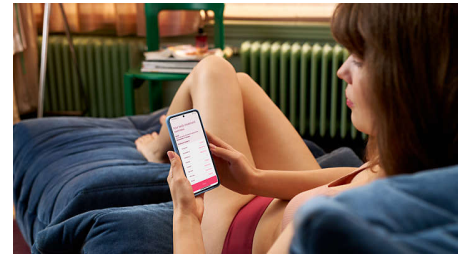

Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2.1 miliony uživatelů.

Pro většinu typů pokožky a chloupků

Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I-V).

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro epilaci bikin: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro citlivou pokožku v oblasti bikin

Nástavec pro epilaci podpaží: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro oblast podpaží

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

Systém bezpečnostního kroužku: Zabránění nechtěným zábleskům

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Krok a záblesk: Pro ošetření oblých ploch

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Technické údaje

Napětí: 100–240 V

Typ baterie: Nabíjecí baterie

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků, což odpovídá 39 letům životnosti lampy**

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Nabíječka: Nabíječka pro více napětí

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Holeň: 8,5 min

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min

