

# PHILIPS

Sistem za odstranjevanje  
dlak IPL

Lumea

Za uporabo samo na telesu

15 min. za depilacijo sp. dela nog

Za do 100.000 svetlobnih  
impulzov

Brezžična zasnova

 Product Picture

SC2004/11



## Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic za gladko kožo

Philips Lumea IPL je najučinkovitejša brezžična rešitev s tehnologijo in čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svilen gladko kožo.

### **Dolgotrajna gladkost**

- Uživate v gladki koži vsak dan
- Enostavno in učinkovito

### **Odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL**

- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo
- Primerno za različne vrste dlak in kože

### **Nežno in učinkovito, tudi na občutljivi koži**

- Večji nastavek za telo za hitro odstranjevanje
- Način pomika in osvetlitve za priročajšo uporabo
- Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih
- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije

### **Popolna svoboda z malo truda**

- Priročna brezžična uporaba
- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov

# Značilnosti

## Dolgotrajna gladkost



Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

## Enostavno in učinkovito



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

## Tehnologija IPL



Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 ženskami.

## Primerne vrste dlak in kože

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dark brown	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Brown	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dark blond	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Light blond	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Red	☑	☑	☑	☑	☑	☑
White/grey	☑	☑	☑	☑	☑	☑

☑ This product is suitable for you to use ☒ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea NI primeren tudi za zelo temno kožo.

## Pet nastavitvev svetlobne energije



Philips Lumea ima pet nastavitvev svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa.

## Območja uporabe



Zanesljivo odstranjajte dlake na predelih telesa pod vratom: noge, pazduhe, predel bikinija, roke in trebuh.

## Priročna brezžična uporaba



Edinstvena brezžična zasnova aparata Lumea zagotavlja največji doseg in enostavno uporabo.

## Nadomestni deli niso potrebni



No replacement lamps or gel needed


Philips Lumea je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk ali gelov.

## Hitro odstranjevanje dlak z nog



Večji nastavek za telo za hitro odstranjevanje na večjih predelih, kot so noge.

## Način pomika in osvetlitve

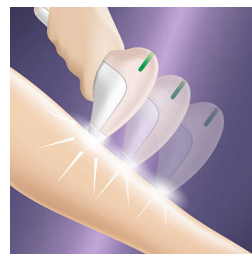

Glavni način uporabe omogoča drsenje za priročnejšo in neprekinjeno uporabo.

# Specifikacije

## Območja uporabe

**Predeli telesa:** Noge, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

## Varnost in prilagodljive nastavitve

**Vgrajen UV-filter:** Kožo varuje pred UV-svetlobo

**5 nastavitve svetlobne energije:** Prilagodljivo glede na vrsto kože

**Vgrajeni varnostni sistem:** Preprečuje nenamerno osvetljevanje

## Način uporabe

**Pomik in osvetlitev:** Za priročno uporabo

**Korak in osvetlitev:** Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

**Žična/brezžična uporaba:** Brezžično

## Napajanje

**Čas polnjenja:** 100 min

**Napetost:** 100–240 V

**Čas delovanja:** Najmanj 370 osvetlitev

## Tehnične specifikacije

**Visokozmogljiva sijalka:** Zagotavlja do 100.000 osvetlitev

## Nastavki

**Nastavek za telo (4 cm<sup>2</sup>):** Za uporabo pod vratom

## Servis

**Garancija:** 2-letna globalna garancija

## Priloženi predmeti

**Navodila za uporabo:** Vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik

**Polnilnik:** Večnapetostni polnilnik

**Shranjevanje:** Torbica

## Čas uporabe

**Spodnji del noge:** 8 minut

**Pazduha:** 1 minuta

**Predel bikinija:** 1 minuta

