

PHILIPS

Sistem za odstranjevanje dlak IPL

Lumea Essential

Za uporabo samo na telesu

15 min. za depilacijo sp. dela nog

Za do 100.000 svetlobnih impulzov

Posebej dolg kabel



SC1991/00



Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic za gladko kožo

Philips Lumea IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

Dolgotrajna gladkost

- Enostavno in učinkovito
- Uživate v gladki koži vsak dan

Odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Nežno in učinkovito, tudi na občutljivi koži

- Za uporabo na telesu
- Prilagodljivo glede na vrsto kože
- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije
- Večji nastavek za telo za hitro odstranjevanje

Kompaktna žična zasnova

- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov

Značilnosti

Uživajte v gladki koži vsak dan



Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

Tehnologija IPL



Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo

uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.

5 nastavitve svetlobne energije



Philips Lumea ima pet nastavitve svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa.

Območja uporabe



Zanesljivo odstranjujete dlake na predelih telesa pod vratom: noge, pazduhe, predel bikinija, roke in trebuh.

Večji nastavek za telo, 4 cm²




Večji nastavek za telo omogoča hitro odstranjevanje na večjih predelih, kot so noge.

Nadomestni deli niso potrebni



Philips Lumea je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk ali gelov.

Primerne vrste dlak in kože

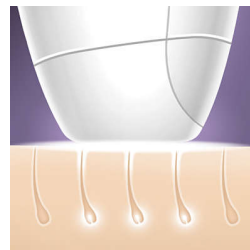

Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea NI primeren tudi za temno kožo.

Specifikacije

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Način uporabe

Korak in osvetlitev: Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

Žična/brezžična uporaba: Žično

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do 100.000 osvetlitev

Nastavki

Nastavek za telo (4 cm²): Za uporabo pod vratom

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Vodnik za hiter začetek,

Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Torbica

Napajalnik: 24 V/1500 mA

Čas uporabe

Spodnji del noge: 8 minut

Pazduha: 1 minuta

Predel bikinija: 1 minuta

