

PHILIPS

Фотоепилатор за
обезкосмяване със SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

Сензор SmartSkin

4 интелигентни приставки: за тяло,
лице, бикини зона и подмишници

Приложение Lumea IPL

Използване без кабел и с кабел



BRI957/00



Насладете се на гладка кожа до 6 месеца* с нашия най-бърз и ефективен фотоепилатор

Най-ефективният фотоепилатор за гладка кожа до 6 месеца след пълен цикъл на третиране**. IPL технологията със SenseIQ осигурява дълготрайна фотоепилация на цялото тяло в уютна на Вашия дом. Получете гладка кожа като след процедура в салон с персонализирани насоки от приложението Lumea IPL.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- Единственият Lumea с безкабелна опция
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен

Пълно решение за лицето и тялото

- Цялостно решение за лице и тяло с 4 умни приставки
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветовете на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Нежен и удобен със SenseIQ
- Оптимизирайте процедурите си с приложението Philips Lumea IPL

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати




На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранята с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Технология SenseIQ



Lumea от серията 9000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

Безкабелен, ако желаете

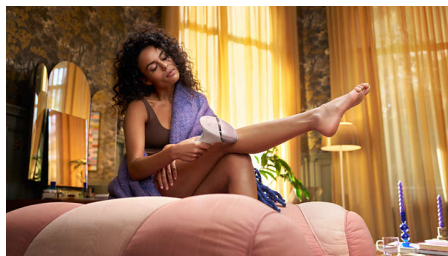

За допълнително удобство серията Lumea 9000 е единственият ни фотоепилатор с безкабелна функционалност, което прави още по-лесно достигането до всяко място с прецизност и използването му където пожелаете.

4 приставки за лице и тяло



Акcesoарите пасват на всяка извивка на тялото и задействат адаптиран режим на работа. Отпред: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Корпус: Извит навътре с голям прозорец. Област на слабините и аксиларна област: извити навън за труднодостъпни места.

Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в

безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Приложение Philips Lumea IPL



Нашето безплатно приложение за насоки ви помага да планирате и да се придържате към графика си за третиране, след което ви ръководи стъпка по стъпка при всяка сесия. Изтеглено от повече от 2,1 милиона потребители.

За повечето типове кожа и косми



Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Форма: изпъкнала извивка, Прозорец с размер: 4,1 см², Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

Приставка за третиране на лицето: Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см², допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

Приставка за третиране на бикини зоната: Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см², Персонализирано третиране на чувствителна бикини зона

Приставка за третиране на долната част на ръката: Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см², Персонализирано третиране на подмишници

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми

според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява случайното генериране на импулс

Сензор за тон на кожата: Установява цвета на кожата ви

Сензор SmartSkin: Правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Употреба с кабел/без кабел: Използване без кабел и с кабел

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Технически спецификации

Тип батерия: Акумулаторна батерия

Напрежение: 100-240 V

Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издържи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата**

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Луксозен калъф

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин

Долни части на краката: 8,5 мин

