




Philips Lumea IPL 9000
Series
Dispositivo IPL para
depilação

Com tecnologia SenseIQ

Axilas, linha do biquíni, corpo,
rosto
Com sensor SmartSkin
Utilização com e sem fios

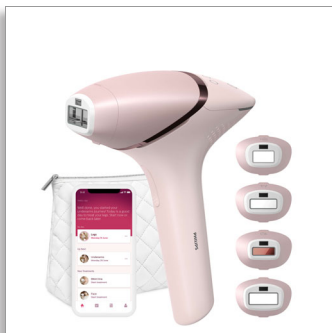

BRI957/00

Obtenha uma pele sem pelos durante 6 meses*

com a nossa luz pulsada intensa mais rápida e eficiente

A luz pulsada intensa mais eficaz, 6 meses após um ciclo de tratamento completo**. A tecnologia de luz pulsada intensa com SenseIQ proporciona uma remoção duradoura dos pelos em todo o corpo, no conforto da sua casa. Obtenha uma pele suave, tal como na esteticista, com orientação personalizada a partir da aplicação Lumea IPL.

Pele macia e de longa duração com tecnologia de luz pulsada Lumea

- Tecnologia de IPL para uso doméstico, desenvolvida com dermatologistas
- Tratamento suave e eficaz comprovado
- Tecnologia SenseIQ para remoção de pelos personalizada

Tratamento especializado para diferentes zonas corporais

- Acessório para axilas com design curvo
- Acessório para linha do biquíni com filtro de luz extra
- Acessório corporal com design curvo
- Acessório de precisão para rosto com filtro adicional
- Sensor SmartSkin com 5 definições de conforto
- Personalize o seu tratamento com a aplicação Philips Lumea IPL
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele

Fácil de utilizar

- Utilização sem cabo


PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Com tecnologia SenseIQ Axilas, linha do biquíni, corpo, rosto. Com sensor SmartSkin, Utilização com e sem fios


Destaques

6 meses sem pelos*

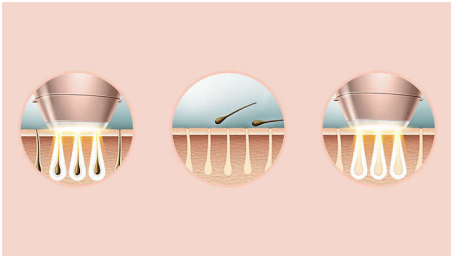

IPL (Intense Pulsed Light) significa luz pulsada intensa. É uma tecnologia que utiliza uma luz quente e suave para eliminar os pelos. A luz desloca-se até à raiz do pelo, fazendo com que o folículo entre numa fase de repouso e estimulando os pelos a serem libertados. A repetição dos tratamentos evita de forma gradual o crescimento dos pelos, deixando a sua pele maravilhosamente livre de pelos e suave ao toque. O sistema Philips Lumea foi desenvolvido com dermatologistas e testado clinicamente para garantir tratamentos fáceis, eficazes e confortáveis, mesmo em áreas sensíveis, tudo a partir do conforto da sua casa.


3 tratamentos, 92% menos pelos***

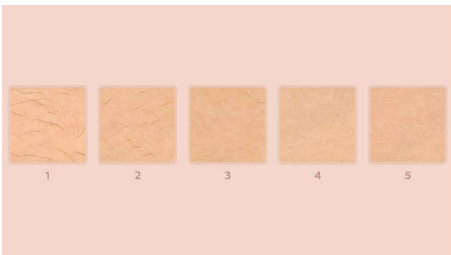

Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos***. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12

tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.

Tecnologia SenseIQ

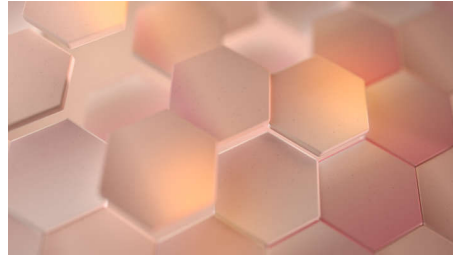

Deteta. O sensor SmartSkin do sistema Lumea deteta o seu tom de pele e indica a definição de luz mais confortável para si. Adapta. O acessório inteligente adapta programas personalizados para cada zona do corpo. Cuida. Desenvolvido em colaboração com dermatologistas e inspirado em si para uma remoção de pelos suave e de longa duração, mesmo em áreas sensíveis****.

Tratamento de zonas do corpo



O seu corpo é único. E a sua pele, curvas e contornos devem ser tratados como tal. Os acessórios para todo o corpo Lumea foram concebidos para se adaptarem perfeitamente a cada curva e adaptam programas personalizados a cada zona do corpo. As janelas de tratamento foram concebidas para maximizar o contacto com a sua pele e garantir

BRI957/00

que a luz não se escape, o que permite tratamentos eficazes e suaves mesmo em zonas delicadas ou sensíveis.

Acessório para axilas



O acessório inteligente para axilas é de tamanho médio, com uma janela de 3 cm², e foi especialmente concebido para tratar de zonas nas axilas de difícil acesso. Quando é encaixado no dispositivo, o acessório adapta um programa personalizado para a zona das axilas. 86% das mulheres estão satisfeitas com a redução de pelos nas axilas*****.

Acessório para linha do biquíni



Encaixe o acessório para linha do biquíni e este adapta um programa personalizado especificamente para essa área. Tem uma janela ideal de 3 cm² com um filtro transparente para conforto extra e o design curvo complementa os contornos do seu corpo para contacto, eficiência e conforto máximos. 78% das mulheres estão satisfeitas com a redução de pelos na linha do biquíni*****.

Dispositivo IPL para depilação

Com tecnologia SenseIQ Axilas, linha do biquíni, corpo, rosto. Com sensor SmartSkin, Utilização com e sem fios

BRI957/00

Especificações

Anexos de especificações técnicas

- Acessório para tratamento nas axilas: Formato: curvo côncavo, Tamanho da janela: 3 cm², Adaptado para a área das axilas

Especificações técnicas dos acessórios

- Acessório para tratamento corporal: Formato: curvo convexo, Tamanho da janela: 4,1 cm², Tratamento adaptado para corpo
- Acessório para tratamento facial: Formato: plano, Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Tratamento adaptado para rosto
- Acessório para tratamento na linha do biquíni: Formato: curvo côncavo, Tamanho da janela: 3 cm², filtro extra, Tratamento adaptado para linha de biquíni

Alimentação elétrica

- Voltagem: 100-240 V

Assistência

- Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

- Lâmpada de alto desempenho: Proporciona 450 000 impulsos de luz*****

Zonas de aplicação

- Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga
- Zonas do rosto: Buço, Queixo, Maxilar
- Zonas sensíveis: Axilas, Biquíni

Itens incluídos

- Instruções de utilização: Manual do utilizador
- Armazenamento: Bolsa de luxo
- Adaptador: 19,5 V / 4000 mA

Definições ajustáveis e de segurança

- Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV
- 5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele
- Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais
- Sensor de tom de pele: Deteta o seu tom de pele
- Sensor SmartSkin: A regulação correta sempre que desejar

Tempo de aplicação

- Axilas: 2:30 min.
- Linha do biquíni: 2 min
- Zonas do rosto: 1:30 min.
- Parte inferior das pernas: 8,5 min.

Modo de aplicação

- Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida
- Utilização com/sem fios: Utilização com e sem fios
- Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas pequenas

Alimentação elétrica

- Sistema potente: Bateria recarregável



Data de publicação
2021-09-17

Versão: 0.0.0

EAN: 08 71010 39691 74

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Reduções de pelo médias após 12 tratamentos: 78% nas pernas, 64% na linha do bikini, 65% nas axilas
** Resultado médio: redução de 58% dos pelos após 12 tratamentos
*** Ao seguir o plano de tratamento, os resultados individuais avaliados nas pernas podem variar
**** Ao seguir o plano de tratamento
***** Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.
***** Estudo realizado nos Países Baixos e na Áustria em 46 mulheres: resultados visíveis após 3 tratamentos nas pernas, na linha do biquíni e nas axilas, e 2 tratamentos no rosto
***** Com base na utilização sem fios, no tamanho da janela e em acessórios curvos
***** Teste realizado em 2020, no Reino Unido, em 190 participantes