

PHILIPS



IPL-hårfjerningsenhed
med SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehørsdele: krop,
ansigt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Til brug med eller uden ledning



BRI958/00

Trådløs lethed, personlig behandling med SenseIQ

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Nyd problemfri, personlig behandling med den ledningsfri version af vores hurtigste Lumea IPL-enhed. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og vejledning i Lumea IPL-appen for at give dig glat hud i lang tid.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge
- Lumea IPL 9000-serien er vores eneste ledningsfri IPL, så sværttilgængelige områder på kroppen nemt kan behandles uden generende ledninger.
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele
- Velegnet til de fleste hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Lumeas SmartSkin-sensor registrerer din hudfarve og angiver den mest behagelige lysindstilling for dig.
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 9000 Series

IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

BRI958/00

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater



Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling.

Den mest praktiske IPL*****



Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks.

dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.

4 smarte tilbehørsdele




Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.

Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Philips Lumea IPL-appen

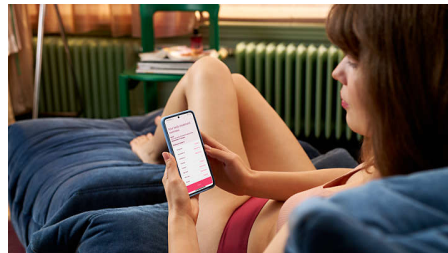

Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

Til de fleste hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).

Specifikationer

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropsbehandlingstilbehør: Form: Konvekst buet, Vinduesstørrelse: 4,1 cm², Skræddersyet behandling af krop: Ben, arme og mave

Ansigtsbehandlingstilbehør: Form: Flad, Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Skræddersyet behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

Bikini treatment attachment: Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm², Skræddersyet behandling til det følsomme bikiniområde

Underarm treatment attachment: Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm², Skræddersyet behandling til armhulerne

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys
5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgår utilsigtede blink

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

SmartSkin-sensor: Den rigtige indstillingsangivelse ved behov

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Til brug med eller uden ledning

Tekniske specifikationer

Spænding: 100-240 V

Batteritype: Genopladeligt batteri

Højeffektivt lys: Bygget til at holde, 450.000 blink, svarende til 39 års pærelevetid**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Brugervejledning: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4.000 mA

Anvendelsestid

Underben: 8,5 min

Under armene: 2,5 min.

Bikiniilinje: 2 min

Ansigtsområder: 1,5 min.

