

PHILIPS



IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL serije
9000

Senzor SmartSkin

4 pametna nastavka: tijelo, lice,
bikini, pazusi

Aplikacija Lumea IPL

Upotreba s kablom ili bežično



BRI957/00

Uživajte u 12 mjeseci* glatke kože bez dlačica uz tehnologiju SenseIQ

Najučinkovitiji IPL, 12 mjeseci nakon punog ciklusa tretmana. Tehnologija IPL uz SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica s cijelog tijela iz udobnosti vašeg doma. Uz personalizirane smjernice u aplikaciji Lumea IPL ostvarite glatku kožu kao u salonu.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Praktična uporaba zahvaljujući žičnom ili bežičnom načinu rada
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Precizni nastavak za lice s dodatnim filtrom
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Lumea IPL serije 9000

IPL uređaj za uklanjanje dlačica

BRI957/00

Istaknute znač.

2 x mjesečno za brze rezultate




Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

Tehnologija SenselQ



Lumea serije 9000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Praktična uporaba zahvaljujući žičnom ili bežičnom načinu rada

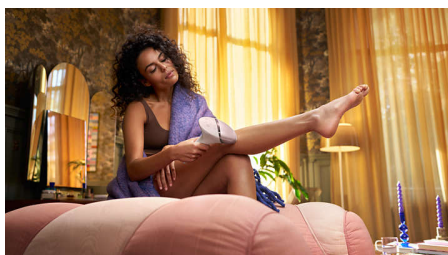

Philips Lumea osmišljen je u praktičnom dizajnu jednostavnom za rukovanje. Za brzi tretman velikih dijelova tijela, poput nogu, odaberite

žični način rada, a za precizan tretman teško dostupnih područja tijela odaberite bežični način rada na baterije.

4 pametna nastavka




Ovaj je nastavak za lice pomno osmišljen. Ima mali, ravni prozor površine 2 cm² kako biste učinkovito i nježno mogli uklanjati dlačice s vašeg lica. Idealan za nosnicu, bradu ili liniju čeljusti, ovaj nastavak ima u sebi integriran i dodatni filter. Kada se stavi na uređaj, ovaj pametni nastavak automatski prilagođava vašem licu tretman svjetlom.

Razvijeno s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL

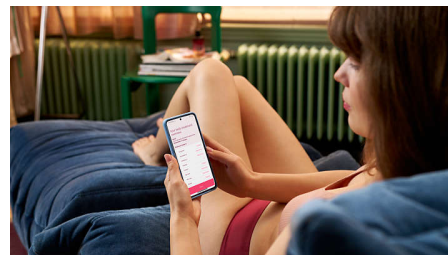

Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Nastavak za bikini zonu: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za osjetljivo bikini područje

Nastavak za pazuhe: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za pazuhe

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehотиčno odašiljanje svjetlosnih impulsa
Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože
Senzor SmartSkin: Indikator odgovarajuće postavke na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Žično/bežično: Upotreba s kabelom ili bežično

Tehničke specifikacije

Vrsta baterije: Punjiva baterija

Napon: 100-240 V

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

Donji dio nogu: 8,5 min

