

PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp, ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Både trådløs bruk og bruk med ledning



BRI958/00



Enkel, trådløs og personlig tilpasset behandling med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Få problemfri og personlig tilpasset behandling med den trådløse versjonen av vår raskeste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og veiledning i Lumea IPL-appen gir deg langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Den eneste Lumea med trådløs tilkobling

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen
- Skånsom og komfortabel med SenseIQ


Høydepunkter

Fire smarte tilbehørsdeler




Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.

Philips Lumea IPL-appen

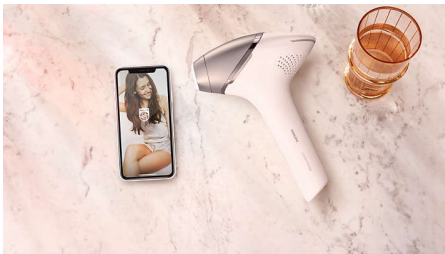

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

Utviklet sammen med hudspesialister

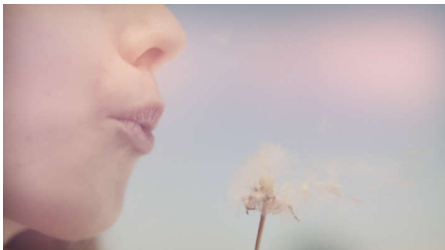

Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og

trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

2 ganger i måneden for raske resultater




Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Trådløs hvis du vil

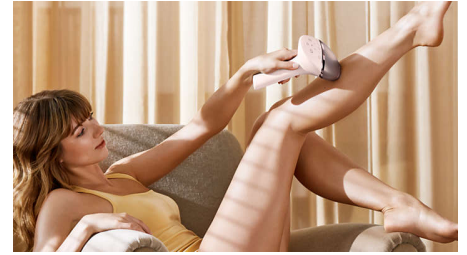

Lumea 9000-serien er vår eneste IPL med praktisk trådløs funksjonalitet, noe som gjør det enda enklere å nå frem hvor som helst med presisjon og bruke den der du befinner deg.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehør

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen
SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Legg: 8,5 min

Underarmer: 2,5 min

Bikiniinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

