

PHILIPS

IPL matiņu likvidēšanas
ierīce ar SenselQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin sensors

3 intelektiskas papildierīces:
ķermenim, sejai, precīzai
darbībai

Lumea IPL lietotne

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI955/00



Bezvadu ērtības, pielāgota apstrāde ar SenselQ Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 12 mēnešus*

Baudiet pielāgotu apstrādi bez piepūles ar mūsu ātrākās Lumea IPL ierīces bezvadu versiju. SenselQ tehnoloģija ar viediem piederumiem un norādēm lietotnē Lumea IPL nodrošinās, lai jūsu āda būtu gluda ilgi.

Maigs un efektīvs process ilgstoši gludas ādas nodrošināšanai

- Lai ātri iegūtu rezultātus, izmantot tikai 2 reizes mēnesī
- Vienīgais Lumea modelis ar bezvadu funkcionalitāti
- Radīta kopā ar dermatologiem, lai lietošana būtu ērta un efektīva

Pilnīgs risinājums sejai un ķermenim

- Visaptverošs risinājums sejas un ķermeņa procedūrām ar 3 viediem uzgaļiem
- Piemērota vairākumam ādas un matu toņu

Personalizēta IPL matiņu likvidēšana

- Saudzējoša un ērta lietošana ar SenselQ
- Optimizējiet ikdienas procedūras, izmantojot Philips Lumea IPL lietotni

Izceltie produkti

3 viedi uzgaļi




Īpaši izstrādāti uzgaļi nevainojami pielāgojas ķermeņa formai un, nonākot saskarē ar ķermeņa zonu, aktivizē katrai tai piemērotāko programmu. Sejai: uzgaļis ar gludu konstrukciju un nelielu lodziņu ar ultravioletā starojuma aizsargfiltru. Ķermenim: uz iekšpusi ieliekts uzgaļis ar lielu lodziņu. Precīzais režīms: uz ārpusi izliekts uzgaļis grūti sasniedzamām zonām.

Philips Lumea IPL lietotne



Mūsu bezmaksas apmācības lietotne palīdz plānot un ievērot izmantošanas grafiku, pēc tam sniedz detalizētas norādes par katru sesiju. To lejupielādējuši vairāk nekā 2,1 miljons lietotāju.

Radīta kopā ar dermatologiem

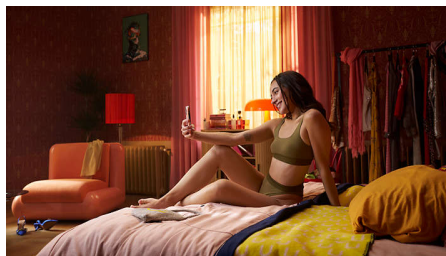

Veselības aprūpes tehnoloģiju nozares līderis Philips izstrādāja ierīci Lumea IPL sadarbībā ar dermatologiem, lai ierīci varētu ērti, efektīvi un droši lietot mājās apstākļos. Ierīce Lumea IPL ir izstrādāta, izmantojot profesionālos salonos izmantoto tehnoloģiju, tādēļ nodrošina saudzējošas procedūras arī jutīgās zonās.

2 reizes mēnesī, lai ātri iegūtu rezultātus




Lietošanas biežums sākumposmā ir ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Pēc tam profilakse nepieciešama tikai reizi mēnesī. Tas arī viss! Abu apakšstilbu procedūra ilgst 8,5 minūtes.

SenselQ tehnoloģija



Ierīcei Lumea 9000 Series ir pieci ērti pielāgojami gaismas iestatījumi. Sensors SmartSkin nosaka ādas toni un palīdz noteikt ērtāko iestatījumu. Viedie uzgaļi pielāgo procedūru katrai ķermeņa zonai atsevišķi.

Pēc nepieciešamības — bezvadu

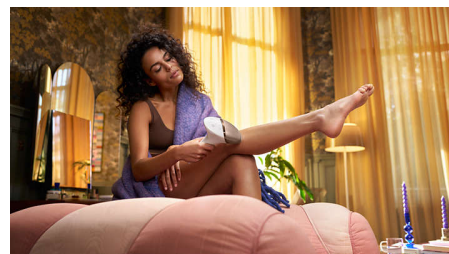

Lai nodrošinātu papildu ērtības, Lumea 9000 Series ir vienīgā IPL ierīce ar bezvadu funkcionalitāti, tādēļ varat vēl ērtāk precīzi sasniegt jebkuru ķermeņa zonu un izmantot ierīci neatkarīgi no atrašanās vietas.

Piemērota vairākumam ādas un matu tipu



IPL ierīču darbībai ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz tumši brūnas ādas (I–V).

Specifikācijas

Pievienoto piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz ārpusi, Loga izmērs: 4,1 cm2, Ķermenim piemērota procedūra: kājas, rokas un vēders

Sejas apstrādes papildpiederums: Forma: plakans, Loga izmērs: 2 cm2, papildu filtrs, Sejai piemērota procedūra: augšlūpa, zods un žokļa līnija

Precīzas apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm2, Bikini zonai un padušu zonai piemērota procedūra

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Lietošana bez vada un ar vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 100–240 V

Akumulatora tips: Uzlādējams akumulators

Augstas veiktspējas lampa: Ilgstošai darbībai, 450 000 mirgošanas reizes, kas atbilst 39 gadu lampas kalpošanas laikam**

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta registrācijas 90 dienu laikā

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas laiks

Padušu zonas: 2,5 min

Bikini līnija: 2 min

Sejas zonas: 1,5 min

Kāju apakšējās daļas: 8,5 min



* Vidējais matiņu samazinājums pēc 12 procedūrām: 86% uz apakšstilbiem, 70% bikini zonā, 67% padusēs

** Ja tiek ievērots procedūras plāns. Aprēķināts lietošanai uz apakšstilbiem, bikini zonā, padusēs un uz sejas. Lampas kalpošanas laiks nepaplašina Philips 2 gadu vispasaules garantiju.