

PHILIPS

AVENT

Elektrische borstkolf

Dubbel

Premium

Opladbare batterij

Timerdisplay



SCF398/11



Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's. Natural Motion-technologie voor sneller kolven*

Maak je klaar voor een nieuwe manier van kolven met de perfecte combinatie van zuigkracht en tepelstimulatie die is geïnspireerd op de manier waarop baby's drinken. De Philips Avent elektrische borstkolf zorgt voor een optimale melkstroom en past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel

Gepersonaliseerd en eenvoudig in gebruik

- Minimaal aantal onderdelen en intuïtieve installatie
- Pauze-/startfunctie
- Geheugenfunctie
- Stille motor om overal discreet te kunnen kolven
- Borstkolf tas en -etui
- Persoonlijke ervaring, 8 + 16 instellingen

Zacht en comfortabel

- Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)
- Kolft zonder dat je naar voren leunt

Sneller kolven — meer melk in minder tijd*

- Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

opladbare batterij en display met timer

- Met oplaadbare batterij zodat je onderweg kunt kolven
- Display om de tijd bij te houden


Kenmerken

Snelle melkafgifte*



Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatierstand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER)*.

Past zich aan je tepel aan

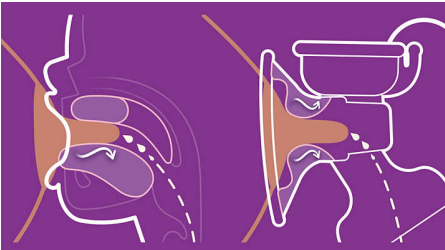

Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).

Zit comfortabel



Voel je ontspannen terwijl je kolft dankzij een design waarmee je rechtop kunt blijven zitten en niet voorover hoeft te leunen. Je hoeft niet voorover te leunen; klinisch bewezen comfortabele kolfhouding*. Op basis van

klinische testresultaten van 20 deelnemers (2019) die het product hebben gebruikt: 90% van de deelnemers vindt de kolfhouding (enkel elektrisch) comfortabel; 95% van de deelnemers vindt de kolfhouding (dubbel elektrisch) comfortabel.

Af te stemmen op jouw behoeften



Stem elke sessie nauwkeurig af op jouw behoeften met een breed scala aan stimulatie- en kolfstanden. Onze borstkolf biedt 8 stimulatie- en 16 kolfstanden voor een persoonlijke ervaring.

Overal discreet kolven



Kolf waar en wanneer je maar wilt dankzij onze stille motor met een slank ontwerp.

Onderweg eenvoudig te gebruiken



Kolf onderweg zonder dat je je zorgen hoeft te maken over stroomvoorziening. Onze oplaadbare batterij wordt geleverd met een micro-USB-adapter en gaat maximaal drie sessies mee met één keer volledig opladen.

Eenvoudig reinigen en instellen



Dankzij ons gesloten kolfsysteem blijft de melk uit de slangen, zodat er minder schoongemaakt hoeft te worden. Doordat de kolf uit minder onderdelen bestaat, is het ook een fluitje van een cent om hem weer in elkaar te zetten.

Sla je favoriete instellingen op



Weet je wat je fijn vindt? De borstkolf onthoudt automatisch je laatst gebruikte instellingen, dus je hoeft alleen maar te gaan zitten en op start te drukken.

Houd je pomptijd bij

Houd met behulp van het digitale timerdisplay bij hoe lang je elke borst afkolft en hoe lang je in totaal kolft.

Pauzeer wanneer je wilt



Als je pauze moet nemen of de kolfstand moet aanpassen, druk je heel eenvoudig op de start-/pauzeknop.

Specificaties

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Borstkolf: BPA-vrij* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te reinigen en te monteren, stille motor, geheugenfunctie, oplaadbare batterij, motordisplay, reistas en etui

Funcities

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie

Instellingen: 16 kolfstanden, 8 stimulatiestanden

Zacht, adaptief kussen: Zachte stimulatie

Inclusief

Reistas: 1 pcs

Fles van 125 ml met speen vanaf 0 mnd: 2 pcs

Wegwerpborstkompressen: 2 pcs

Kolfset: 2 pcs

Isolerend etui: 1 pcs

Micro-USB-adapter: 1 pcs

Motorunit (oplaadbaar): 1 pcs

Afsluitplaatje: 2 pcs

Vermogen

Elektriciteitsnet: 100 - 240 V

